ACCU-CHEK® Mobile

SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA



Manuale per l'uso



Spiegazione dei simboli

Sulla confezione, sull'etichetta del misuratore e sul pungidito appaiono i simboli indicati qui di seguito. I simboli hanno il sequente significato:



Consultare il manuale per l'uso



Attenzione (consultare la documentazione allegata)! Osservare le avvertenze di sicurezza contenute nel manuale dello strumento.



Conservare a



Scadenza



Prodotto monouso

STERILE R

Sterilizzazione tramite radiazione



Fabbricante



Codice dell'articolo

L₀T

Numero di lotto

IVD

Per uso diagnostico in vitro



€ 0088

Misuratore di glicemia: questo prodotto soddisfa i requisiti delle Direttive 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro e 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE).

Pungidito e caricatore di lancette: questi prodotti soddisfano i requisiti della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medicali.



Questo strumento soddisfa i requisiti della parte 15 delle normative FCC e della norma Industry Canada RSS-210.



Questo strumento soddisfa i requisiti della legge giapponese sulle radiocomunicazioni ("Radio Law") 100.

La spiegazione di altri simboli è riportata nei manuali per l'uso/foglietti illustrativi allegati alla confezione dei relativi componenti.

Versione attualizzata: 2008-11

Uso previsto

Misuratore di glicemia Accu-Chek Mobile

Misuratore per la determinazione quantitativa della glicemia in sangue capillare fresco con le cassette test Accu-Chek Mobile.

Adatto solo all'autocontrollo.



Il misuratore può essere utilizzato per la determinazione della glicemia esclusivamente da una sola persona.

Se il misuratore venisse utilizzato da altre persone o da personale medico per la misurazione della glicemia su più persone, sussiste il rischio di trasmettere infezioni. Questo misuratore non è pertanto indicato per l'uso professionale nelle strutture sanitarie.

Pungidito Accu-Chek FastClix Mobile

Pungidito con profondità di puntura regolabile per il prelievo di sangue capillare dal polpastrello con il caricatore di lancette Accu-Chek FastClix e, con l'ausilio dello speciale cappuccio AST, anche da siti alternativi (p.es. tenar e ipotenar della mano).



Il pungidito è indicato solo per l'uso personale!

Può essere utilizzato esclusivamente da una sola persona per il prelievo di sangue. Se il pungidito venisse utilizzato da altre persone o da personale medico per il prelievo su più persone, sussiste il rischio di trasmettere infezioni. Questo pungidito non è pertanto indicato per l'uso professionale nelle strutture sanitarie.

Note al manuale per l'uso

Leggere attentamente tutte le istruzioni riportate in questo manuale per l'uso prima di eseguire per la prima volta un test della glicemia. Per qualsiasi informazione rivolgersi al Servizio Assistenza (vedere capitolo 21).

Il manuale per l'uso vi consente di conoscere passo dopo passo il misuratore e il pungidito. Il manuale contiene tutte le informazioni necessarie per l'uso e la manutenzione del misuratore e del pungidito, nonché la soluzione di eventuali errori. Per garantire il perfetto funzionamento, è necessario usare il misuratore e il pungidito in modo appropriato osservando tutte le avvertenze. Il misuratore e il pungidito sono strumenti di precisione: l'uso improprio può comprometterne il funzionamento.

In questo manuale per l'uso appaiono tre tipi di avvertenza. Leggere attentamente tali avvertenze!



Questo simbolo segnala eventuali pericoli di lesione o di danno alla salute del paziente o di altre persone.



Questo simbolo segnala le azioni che possono danneggiare il misuratore, la cassetta test o il pungidito.



Questo simbolo segnala informazioni importanti.

Tutte le istruzioni che invitano ad eseguire un'operazione hanno lo sfondo colorato come nell'esempio:

Aprire lo sportello spingendo fino in fondo la superficie rigata nella direzione della freccia.

Nota bene:

Le date, le ore e i risultati illustrati in questo manuale per l'uso fungono solo da esempio. Gli esempi mostrano i risultati nell'unità di misura mg/dl (p.es. 106 mg/dl), le date nel formato giorno-meseanno (p.es. 26.02.09) e le ore in formato 24 ore (p.es. 18:30). Sul display del misuratore i dati possono apparire anche in altro modo. Per esempio il misuratore può visualizzare i risultati nell'unità di misura mmol/l (p.es. 5,8 mmol/l) e/o la data in un altro formato (in base alle impostazioni prescelte).

Con l'aiuto dello schema del sistema prendere visione di tutti gli elementi che compongono il misuratore e il pungidito (vedere capitoli 1.1 e 1.2). Provare tutte le fasi delle procedure descritte nel manuale ed esercitarsi nell'uso del misuratore e del pungidito.

Indice

1	Cond	oscere il misuratore e il pungidito	13
	1.1	Schema del misuratore	
	1.2	Schema del pungidito	17
	1.3	Schema della misurazione della glicemia	18
	1.4	Caratteristiche principali	20
	1.5	Descrizione del menu e dei pulsanti	23
		Elementi del menu	24
		Pulsante (On/Off e Invio)	26
		Pulsante (Giù)	28
		Pulsante 🖉 (Su)	
	1.6	Accensione del misuratore	30
	1.7	Spegnimento del misuratore	32
	1.8	Apertura dei menu	34
	1.9	Come effettuare le immissioni	37
		Modifica dei valori numerici	37
		Attivazione e disattivazione delle funzioni	38
2	0per	razioni preliminari	39
	2.1	Contenuto della confezione	39
	2.2	Verifica dell'unità di misura del misuratore	40

	2.3	Inserimento della prima cassetta test	
	2.4	Come staccare la pellicola di protezione dal display	48
	2.5	Come estrarre la pellicola di protezione delle batterie	48
	2.6	Impostazione della lingua	49
3	Misu	urazione della glicemia	54
	3.1	Preparazione del pungidito	55
		Inserimento del caricatore di lancette	57
		Impostazione della profondità di puntura	59
		Preparazione di una nuova lancetta	
		Sostituzione del caricatore di lancette usato	
		Come sganciare e agganciare il pungidito	62
	3.2	Esecuzione del test della glicemia	64
		Come avviare il test della glicemia aprendo lo sportello	
		Come avviare il test della glicemia tramite il menu (principale)	
		Esecuzione del prelievo di sangue	70
		Applicazione della goccia di sangue sulla zona reattiva	73
		Spegnimento del misuratore	75
		Simboli visualizzati insieme al risultato	77
		Come evidenziare i risultati	78

	3.3	Interpretazione dei risultati	84
		Intervallo di misura	
		Risultati non plausibili – possibili fonti d'errore	85
ļ	Impo	ostazioni	86
	4.1	Schema generale delle impostazioni	86
	4.2	Apertura del menu Impostazioni	89
	4.3	Impostazione di ora e data, selezione del formato	92 95
	4.4	Impostazione di suoni e avvisi	
	4.5	Impostazione dei promemoria	106 109 115
	4.6	Impostazione dell'intervallo ideale	120

	4.7	Impostazione del volume	
	4.8	Impostazione della luminosità	128
	4.9	Impostazione della lingua Come correggere una lingua impostata erroneamente	
5	II mi	isuratore come diario elettronico	133
	5.1	Richiamo dei risultati memorizzati	136 137
	5.2	Visualizzazione della media dei valori	139
	5.3	Trasferimento dei risultati Come avviare il trasferimento con i pulsanti ☑ e ▲ Come avviare il trasferimento tramite il menu <i>Memoria</i> Trasferimento dei risultati per la valutazione Trasferimento dei risultati in formato tabella Se il trasferimento fallisce	147 148 149 151
	5.4	Impostazione del formato di visualizzazione dei risultati memorizzati	156
6	Mod	lalità acustica	159
	6.1	Segnale al momento dell'accensione	161
	6.2	Segnali acustici durante il test	161

	6.3	Annuncio del risultato dopo il test	162
		Misuratori mg/dl	163
		Misuratori mmol/I	163
	6.4	Annuncio di avvertenze e messaggi d'errore	164
7	Con	trollo del misuratore	165
	7.1	Preparazione del controllo di funzionalità	166
	7.2	Esecuzione del controllo di funzionalità	167
		Test di controllo non valido – possibili fonti d'errore	
8	Men	nu Altre funzioni	178
9	Esec	cuzione del test del display	179
10	Visu	alizzazione della scadenza della cassetta test	181
11		zia del misuratore e del pungidito	182
	11.1	Pulizia del misuratore	182
		Parti esterne	182
		Parti interne	183
	11.2	Pulizia del pungidito	192

12	Sostituzione della cassetta test	193
	12.1 Preparazione della sostituzione la cassetta	194
	12.2 Sostituzione della cassetta	195
13	Informazioni sul numero di test disponibili	201
14	Sostituzione delle batterie	202
15	Condizioni di misurazione e conservazione	207
	15.1 Temperatura	207
	15.2 Umidità atmosferica	208
	15.3 Condizioni di luce	
	15.4 Fonti di disturbo	209
16	Simboli, avvisi, problemi e messaggi d'errore	210
	16.1 Simboli	
	16.2 Avvisi	211
	16.3 Problemi	217
	16.4 Messaggi d'errore	219

Indice

17	Smaltimento del misuratore	225
18	Dati tecnici	227
19	Componenti del sistema	230
20	Brevetti	231
21	Servizio Assistenza	232
	21.1 Consulenza e soluzione problemi	.232
	21.2 Indirizzi	.232
22	Indice analitico	233
23	Schema generale del menu	240

Questo capitolo presenta in sintesi:


- il misuratore
- il pungidito
- la misurazione della glicemia
- le caratteristiche del misuratore e del pungidito.

Infine viene fornita una descrizione su

- come appaiono i menu,
- come si accende e si spegne il misuratore,
- come si aprono i menu,
- come si effettuano le immissioni.

Prima di poter eseguire un test della glicemia o effettuare le impostazioni del misuratore, è necessario aver compiuto le operazioni preliminari descritte nel capitolo 2.

1.1 Schema del misuratore

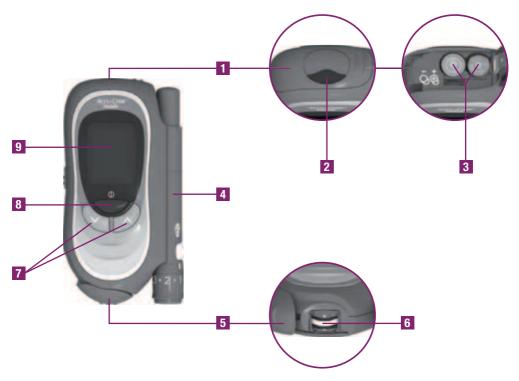

- 1 Coperchio vano batterie (a destra: dall'alto; ultimo a destra: aperto)
- 2 Interfaccia a infrarossi (interfaccia integrata per la trasmissione dati, p.es. ad un computer)
- 3 Batterie (2 batterie alcalino-manganese ad alta energia, tipo AAA, 1,5 V)
- 4 Pungidito (agganciato)
- 5 Sportello (in basso: aperto)
- 6 Zona reattiva (pronta per la misurazione sulla punta della cassetta) – dove applicare il sangue
- 7 Pulsanti Giù/Su
- 8 Pulsante On/Off e Invio
- 9 Display



- 10 Tasto cursore per sganciare il pungidito
- 11 Etichetta del misuratore
- 12 Tasto cursore per aprire il coperchio del vano portacassetta
- 13 Coperchio del vano portacassetta (in basso: aperto)
- 14 Cassetta test (inserita)

1.2 Schema del pungidito



- 15 Pulsante multifunzionale (per caricare e rilasciare la lancetta)
- 16 Levetta per ruotare il caricatore di lancette e posizionare una nuova lancetta
- 17 Caricatore di lancette con 6 lancette
- 18 Numero indicante la profondità di puntura
- 19 Cappuccio ruotabile (ruotando il cappuccio inserito si seleziona la profondità di puntura)
- 20 Punto di uscita della lancetta
- 21 Indicatore della profondità di puntura impostata
- 22 Finestrella con il numero delle lancette disponibili

1.3 Schema della misurazione della glicemia



1 Aprire lo sportello



2 Caricare il pungidito



3 Eseguire il prelievo



4 Applicare il sangue



5 Leggere il risultato



6 Chiudere lo sportello

1.4 Caratteristiche principali

■ Cassetta test al posto delle strisce reattive

La cassetta test contiene un nastro continuo con 50 zone reattive. Quando si esegue un test, sulla punta anteriore della cassetta si posiziona automaticamente una zona reattiva.

■ Semplicità d'uso

Per eseguire un test non è necessario premere alcun pulsante. Basta aprire lo sportello, applicare il sangue sulla zona reattiva, leggere il risultato e chiudere lo sportello.

■ Pungidito agganciato

È possibile eseguire il prelievo di sangue tenendo il pungidito agganciato al misuratore. Se lo si desidera è anche possibile sganciare il pungidito e poi eseguire il prelievo.

■ Pungidito con riserva di lancette

Nel pungidito viene inserito un caricatore con 6 lancette sterili. Azionando la levetta sul pungidito, il caricatore ruota sulla lancetta successiva. È quindi possibile eseguire 6 prelievi di sangue con lancette nuove e sterili e alla fine sostituire l'intero caricatore.

■ Nessuna codifica

Ogni cassetta test contiene un chip RFID (RFID = ingl. Radio Frequency IDentification = Identificazione automatica a radiofrequenza). Quando si inserisce una cassetta test, il misuratore viene codificato automaticamente e informato sulle caratteristiche specifiche delle zone reattive di tale cassetta.

■ Controllo della quantità di sangue

Il misuratore è in grado di riconoscere se la quantità di sangue applicata è sufficiente (circa $0,3~\mu l=0.3~millesimi di millilitro) e dà inizio al test.$

■ Display retroilluminato

Tutti i dati che appaiono sul display sono illuminati in giallo su sfondo nero. Per facilitare la lettura è possibile regolare la luminosità a seconda delle diverse condizioni ambientali.

Uso guidato da messaggi visualizzati

Il misuratore guida l'utente in tutte le operazioni visualizzando messaggi nella lingua selezionata. È possibile scegliere fra 15 lingue. I testi sono in parte accompagnati da simboli e grafici.

■ Menu operativi

Le impostazioni e le funzioni del misuratore sono raggruppate tematicamente in diversi menu. In fondo al manuale per l'uso è riportato uno schema generale dei menu disponibili.

■ Promemoria

È possibile impostare dei promemoria, ad esempio per ricordarsi di eseguire un test della glicemia. Agli orari impostati il misuratore emette un segnale e visualizza l'ora del promemoria.

■ Intervallo ideale dei valori glicemici

È possibile impostare l'intervallo ideale individuale dei propri valori glicemici. L'intervallo ideale comprende i valori glicemici che dovrebbero risultare quando la terapia funziona in modo ottimale. Se un valore è al di sopra o al di sotto di tale intervallo, il display visualizza un simbolo di avvertenza.

■ Evidenziazione dei risultati

È possibile evidenziare i risultati con diversi simboli che indicano particolari situazioni in cui è stato eseguito il test.

■ Memoria dei risultati

Il misuratore memorizza automaticamente sino a 500 risultati con ora, data e tutte le altre informazioni importanti relative al test.

■ Valutazione dei dati integrata

Il misuratore può calcolare la media dei risultati memorizzati degli ultimi 7, 14 e 30 giorni.

■ Trasferimento dati ad un computer

Il misuratore dispone di un'interfaccia a infrarossi. Questa consente di trasferire i risultati memorizzati ad un computer.

1.5 Descrizione del menu e dei pulsanti



Questo capitolo spiega come sono strutturati i menu, cosa significano i simboli ivi contenuti e con quali pulsanti è possibile navigare fra le diverse voci del menu. In fondo al manuale per l'uso è riportato uno schema completo dei menu disponibili.

Sul display del misuratore acceso è visualizzato il menu selezionato nella lingua prescelta.

Con i tre pulsanti posti sotto il display è possibile navigare fra le voci del menu.

Elementi del menu



Le seguenti illustrazioni mostrano gli elementi principali che compongono il menu.

- 1 Titolo del display o del menu (non in tutte le visualizzazioni).
- 2 Voce del menu selezionata, evidenziata dallo sfondo giallo. Quando si preme il pulsante , viene selezionata la voce selezionata (comando "Seleziona" sopra il pulsante). Il display visualizza quindi p.es un menu o un sottomenu oppure si apre un campo per l'immissione di un numero.
- 3 Voce non selezionata.



- 4 Il simbolo v indica che la funzione (nell'esempio Suoni/Avvisi) è attivata.
- 5 Il simbolo ... indica che la funzione (nell'esempio *Interv. ideale*) è disattivata.
- 6 Il comando che appare in questa posizione viene eseguito premendo il pulsante . Il tipo di comando dipende dalla visualizzazione del display in quel determinato momento (vedere descrizione del pulsante On/Off e Invio).
- Il simbolo 🛧 indica che al di sopra della prima voce visibile vi sono altre voci disponibili.
- 8 Il simbolo ** indica che al di sotto dell'ultima voce visibile vi sono altre voci disponibili.

Pulsante (0n/Off e Invio)



- Con questo pulsante è possibile
- accendere o spegnere il misuratore (tenere premuto a lungo il pulsante, vedere capitoli 1.6 e 1.7); nella funzione On/Off (accensione/spegnimento) il pulsante è rappresentato nel manuale per l'uso dal simbolo

oppure

 eseguire il comando visualizzato sul display sopra il pulsante (premere il pulsante solo brevemente); nella funzione di Invio per eseguire i comandi, il pulsante è rappresentato nel manuale per l'uso dal simbolo











Vi sono diversi tipi di comandi, per esempio (vedere illustrazioni a lato):

- Seleziona consente di selezionare la voce evidenziata. Si apre quindi p.es. un menu o un sottomenu oppure un campo per l'immissione di un numero.
- Avanti consente di passare dalle ore ai minuti.

- *OK* conferma l'ora impostata.
- Off spegne i segnali acustici.

Pulsante 🔪 (Giù)



- Con questo pulsante
- si retrocede in un menu o in una lista oppure
- si diminuiscono i valori immessi.

Il pulsante (Giù) è rappresentato nel manuale per l'uso dal simbolo .



Pulsante 💋 (Su)




- Con questo pulsante
- si va avanti in un menu o in una lista oppure
- si aumentano i valori immessi.

Il pulsante (Su) è rappresentato nel manuale per l'uso dal simbolo .



1.6 Accensione del misuratore



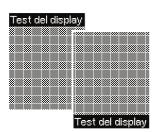

1 A misuratore spento, premere il pulsante On/Off inché il misuratore si accende (più di 2 secondi).

Tale istruzione sarà data in seguito nel manuale per l'uso con la formula sintetica:

Accendere il misuratore con ...

Il misuratore esegue il test del display durante il quale appare un'immagine a scacchiera giallo-nera formata da piccoli punti luminosi.

2 Durante il test del display, controllare che l'immagine a scacchiera non presenti errori.

Alcuni esempi di errori nell'immagine a scacchiera sono riportati al capitolo 9.





Il misuratore termina automaticamente il test del display dopo circa 2 secondi.

Il misuratore visualizza quindi il numero dei test disponibili nella cassetta test e passa al menu (principale).

1.7 Spegnimento del misuratore



Tenere premuto il pulsante per spegnere lo strumento È possibile spegnere il misuratore in due modi: con il pulsante On/Off oppure tramite il menu (principale).

Con il pulsante On/Off

Premere il pulsante On/Off pinché la barra a segmenti luminosi sul display è completa (almeno 2 secondi).

Tale istruzione sarà data in seguito nel manuale per l'uso con la formula sintetica:

Spegnere il misuratore con .



Il misuratore visualizzerà il numero dei test disponibili e poi si spegnerà.

È possibile spegnere il misuratore con il pulsante On/Off in qualsiasi momento. Se si rilascia il pulsante On/Off prima che la barra a segmenti luminosi sia completa, il misuratore torna al display visualizzato in precedenza.

Menu

Eseguire il test Spegnere Memoria Impostazioni Altre funzioni Seleziona



Menu Eseguire il test Spegnere Memoria Impostazioni Altre funzioni Seleziona

Tramite il menu (principale)

- 1 Entrare nel menu (principale).
- 2 Selezionare con il pulsante 🔽 o \Lambda la voce *Spegnere.*





3 Premere il pulsante (Seleziona).

Il misuratore visualizzerà per informazione il numero dei test disponibili e poi si spegnerà.

Questa opzione per spegnere il misuratore sarà data in seguito nel manuale per l'uso con la formula sintetica:

1 Spegnere il misuratore tramite *Spegnere*.

1.8 Apertura dei menu



La procedura per aprire i menu è sempre la stessa. Esempio: per aprire il menu *Data*

- Accendere il misuratore con .
- 2 Attendere finché il display visualizza il menu (principale).







- 3 Premere tre volte il pulsante **▼** finché la voce *Impostazioni* viene evidenziata dallo sfondo giallo.
- 4 Premere il pulsante (Seleziona) per aprire il menu Impostazioni.







È evidenziato il menu Ora/Data.

5 Premere il pulsante (Seleziona) per aprire il menu Ora/Data.



Ora/Data
Menu
Indietro
Ora
Data
Formato ora
Seleziona



- 6 Selezionare con il pulsante 🔽 o 🔼 la voce *Data*.
- 7 Premere il pulsante (Seleziona) per impostare la data.

Data

GG MM AA

26.02.09

Avanti

Il menu *Data* è aperto.



Nel manuale per l'uso la procedura per aprire il menu *Data* viene sintetizzata come segue:



In ugual modo sono descritte le procedure per aprire di altri menu.

1.9 Come effettuare le immissioni

Modifica dei valori numerici

I valori numerici evidenziati da uno sfondo giallo possono essere modificati.



Premere il pulsante **y** per diminuire un valore.

Premendo una volta il pulsante il valore diminuisce di 1. Tenendo premuto il pulsante, i numeri scorrono a ritroso finché si rilascia il pulsante.




Premere il pulsante per aumentare un valore.

Premendo una volta il pulsante il valore aumenta di 1. Tenendo premuto il pulsante, i numeri scorrono in avanti finché si rilascia il pulsante.

Attivazione e disattivazione delle funzioni

Alcune funzioni, come ad esempio i segnali acustici e i simboli per evidenziare i risultati, vengono solo attivate o disattivate.

Queste funzioni sono riconoscibili perchè sono precedute da un segno di spunta o un quadratino e il comando che appare per il pulsante e il comando è diverso, anche la funzione può essere modificata).

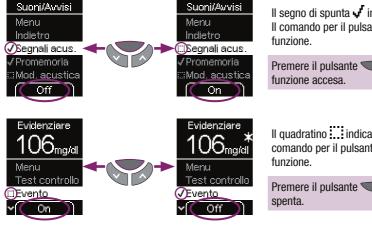

Il segno di spunta **v** indica che la funzione è attivata. Il comando per il pulsante è *Off* per disattivare la funzione

Premere il pulsante (Off) per disattivare la funzione accesa.

Il quadratino i indica che la funzione è disattivata. Il comando per il pulsante è *On* per attivare la funzione

Premere il pulsante (On) per attivare la funzione spenta.

2 Operazioni preliminari

2.1 Contenuto della confezione

Verificare che il contenuto della confezione sia completo.

Una lista del contenuto è riportata sulla confezione stessa. Nel caso in cui dovesse mancare qualcosa, rivolgersi al Servizio Assistenza. L'indirizzo è riportato in fondo a questo manuale.

2.2 Verifica dell'unità di misura del misuratore



I valori della glicemia possono essere visualizzati in due diverse unità di misura (mg/dl oppure mmol/l). Per questo motivo vi sono due versioni dello stesso misuratore. Verificare che il misuratore in uso visualizzi l'unità di misura desiderata. Sull'etichetta posta sul retro del misuratore è indicata l'unità di misura visualizzata dal misuratore. Se non si conosce l'unità di misura per i propri valori, chiedere al medico curante.



L'unità di misura visualizzata dal misuratore non può essere modificata. Se sull'etichetta del misuratore fosse stampata un'unità di misura diversa dalla propria, sostituire il misuratore presso il rivenditore di fiducia o rivolgersi al Servizio Assistenza. Se l'unità di misura non è corretta, i risultati potrebbero essere interpretati in modo errato.

2.3 Inserimento della prima cassetta test

Nel misuratore nuovo e mai utilizzato non è inserita alcuna cassetta test.



Leggere il foglietto illustrativo della cassetta test. Nel foglietto illustrativo sono contenute informazioni importanti riguardanti fra l'altro la conservazione delle cassette e le possibili cause di risultati errati.



Se la confezione fosse danneggiata, non utilizzare la cassetta test. In caso contrario si potrebbero ottenere falsi risultati. Risultati errati possono influenzare negativamente le decisioni terapeutiche con conseguenti danni alla salute.



Estrarre la cassetta test dalla confezione solo nel momento in cui si desidera inserirla nel misuratore. Nella confezione originale la cassetta test è protetta da eventuali danni e dall'umidità.

- <u>(i)</u>
- Inserire la prima cassetta test nel misuratore prima di togliere la pellicola di protezione delle batterie e di mettere in funzione il misuratore.
- (**i**)

Sulla scatola della cassetta test è stampata una tabella con i valori di riferimento per il controllo di funzionalità (controllo del misuratore con soluzioni di controllo di glucosio). Il misuratore verifica automaticamente se il valore del controllo di funzionalità è corretto. Il valore può essere anche verificato ulteriormente con l'ausilio della tabella. Conservare a questo scopo la scatola della cassetta test. Tenere presente che la tabella stampata sulla scatola è valida esclusivamente per la cassetta test a cui appartiene. Le cassette test di altre confezioni hanno altre tabelle.

Operazioni preliminari



1 Aprire lo sportello spingendo fino in fondo la superficie rigata nella direzione della freccia. Si deve sentire scattare in sede lo sportello.



2 Girare il misuratore con il retro rivolto verso l'alto.




3 Spingere il tasto cursore nella direzione della freccia per aprire il coperchio del vano portacassetta. Il coperchio si apre con uno scatto.


4 Aprire completamente il coperchio del vano portacassetta. Prima che si apra completamente, il coperchio deve superare una leggera resistenza accompagnata da un CLIC.

Il coperchio del vano portacassetta è completamente aperto quando si trova leggermente inclinato verso l'esterno come illustrato nella figura.

Operazioni preliminari

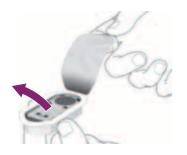

5 Estrarre la cassetta dalla confezione.

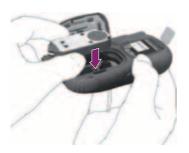

6 Inserire la cassetta nel misuratore con il lato argentato rivolto verso l'alto.



7 Chiudere e premere il coperchio del vano portacassetta. Deve scattare in sede con un CLIC.



8 Chiudere lo sportello spingendolo fino in fondo nella direzione della freccia. Si deve sentire scattare in sede lo sportello.

Operazioni preliminari

Scadenza della cassetta test

Quando la cassetta test si trova nel misuratore, quest'ultimo controlla regolarmente quando è stata inserita e ne calcola il termine di scadenza per l'uso. La cassetta test deve essere utilizzata entro 3 mesi (termine di scadenza per l'uso). Se s'inserisce nel misuratore una cassetta test già iniziata, il termine di scadenza per l'uso viene calcolato dalla data in cui la cassetta è stata inserita nel misuratore per la prima volta. Tale data è memorizzata nella cassetta.

Quando viene superata una delle due scadenze – termine di scadenza per l'uso o data di scadenza – la cassetta non è più stabile. Con tale cassetta test non è più possibile eseguire alcun test.



18:30 26.02.09 Scadenza superata Inserire cassetta nuova **Quando si inizia un test** e si avvicina o è già stata superata la scadenza, il misuratore emette un avviso.

Il primo avviso appare 10 giorni prima della scadenza, gli avvisi successivi appaiono rispettivamente 5, 2 e 1 giorni prima.

Premere il pulsante (Avanti) per iniziare il test.

Se la cassetta test è scaduta, il display visualizzerà l'avviso riportato qui a fianco.

Spegnere il misuratore con e inserire una nuova cassetta test nel misuratore.

2.4 Come staccare la pellicola di protezione dal display

Il display del misuratore è protetto da una pellicola di protezione.

Staccare questa pellicola di protezione.



2.5 Come estrarre la pellicola di protezione delle batterie

Il misuratore viene fornito con le batterie inserite. I punti di contatto delle batterie sono coperti da una pellicola di protezione per evitare che si esauriscano anzitempo. Togliere la pellicola di protezione prima di mettere in funzione il misuratore.

Tirare ed estrarre la pellicola di protezione dal misuratore.



Le istruzioni per sostituire le batterie sono riportate nel capitolo 14.

2.6 Impostazione della lingua

Dopo aver inserito la cassetta test e aver tolto le pellicole di protezione dal display e dalle batterie (vedere capitoli dal 2.3 al 2.5), si deve impostare la lingua con cui si desidera visualizzare i messaggi sul display. Il misuratore richiede automaticamente di effettuare l'impostazione, quando lo si accende per la prima volta.

È possibile scegliere fra 15 lingue:

- English US
- English UK
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Français
- Dansk
- Svenska

- ■にほんご
- Türkçe
- Português
- Ελληνικά
- Norsk
- Suomi
- Nederlands

Operazioni preliminari



A misuratore spento, premere il pulsante 0n/Off finché il misuratore si accende (più di 2 secondi).



Dopo la prima accensione, il display visualizza automaticamente il menu per la selezione della lingua.

La lingua preimpostata è *English UK.* È possibile mantenere questa lingua oppure selezionarne un'altra.




- 2 Premere il pulsante o finché si raggiunge e viene evidenziata la lingua desiderata.
- 3 Premere il pulsante sotto il display per selezionare la lingua.

Il display alla fine visualizza la lingua appena selezionata.

- Confermare il messaggio con il pulsante (OK).
- Se involontariamente è stata selezionata la lingua sbagliata, è possibile modificare l'impostazione in seguito (vedere capitolo 4.9). Fino a quel momento però il menu verrà visualizzato nella lingua selezionata erroneamente.

Operazioni preliminari

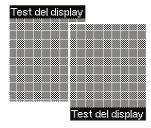

Il misuratore esegue infine il test del display durante il quale appare un'immagine a scacchiera giallo-nera formata da piccoli punti luminosi.

5 Controllare se l'immagine a scacchiera contiene errori.

Alcuni esempi di errori nell'immagine a scacchiera sono riportati al capitolo 9.



Se l'immagine a scacchiera è difettosa, è possibile che i risultati non vengano visualizzati correttamente. In tal caso sostiuire il misuratore presso il rivenditore di fiducia o rivolgersi al Servizio Assistenza.

Il misuratore termina automaticamente il test del display dopo circa 2 secondi.



A questo punto il misuratore visualizza fino a quando è valida la cassetta.

6 Premere il pulsante (Avanti).

Il misuratore visualizza il numero dei test ancora disponibili nella cassetta per eseguire le misurazioni della glicemia.

Infine appare il menu (principale).

Ora è possibile decidere ad esempio se:

eseguire un test della glicemia

Premere (Seleziona).

spegnere il misuratore

Selezionare con \bigcirc Spegnere \rightarrow premere \bigcirc .

effettuare delle impostazioni

3 Misurazione della glicemia

Dopo aver inserito la cassetta test, aver tolto le pellicole di protezione dal display e dalle batterie e aver impostato la lingua (vedere capitolo 2), il misuratore è pronto per eseguire le misurazioni della glicemia.

Ora e data sono già preimpostate nel misuratore. Se non dovessero coincidere con ora e data correnti, è possibile correggerle (vedere capitolo 4).

Se si desidera utilizzare determinate funzioni del misuratore (p.es. i promemoria per ricordarsi di eseguire le misurazioni della glicemia), è possibile effettuare ora o successivamente le relative impostazioni (vedere capitolo 4).

Per eseguire un test della glicemia sono solo necessari:

- il misuratore con la cassetta test inserita
- il pungidito con il caricatore delle lancette inserito.

3.1 Preparazione del pungidito



Cappuccio AST

Con il pungidito è possibile prelevare il sangue dal polpastrello del dito o da un altro sito (alternativo) del corpo. La profondità di puntura può essere regolata su 11 diversi livelli a seconda della conformazione cutanea individuale.

Il pungidito può essere impiegato sia in posizione agganciata che sganciata dal misuratore.

Se si desidera effettuare il prelievo da un sito alternativo (tenar e ipotenar del palmo della mano, braccio, avambraccio, polpaccio o coscia), è necessario sostituire il normale cappuccio nero del pungidito con lo speciale cappuccio AST (AST = ingl. Alternative Site Testing = test de siti alternativi). Se il cappuccio AST non è incluso nella confezione, è possibile ordinarlo presso il Servizio Assistenza.

Leggere le istruzioni per l'uso del cappuccio AST prima di utilizzare sangue prelevato da siti alternativi per eseguire il test della glicemia.



Il pungidito è indicato solo per l'uso personale!

Può essere utilizzato esclusivamente da una sola persona per il prelievo di sangue. Se il pungidito venisse utilizzato da altre persone o da personale medico per il prelievo su più persone, sussiste il rischio di trasmettere infezioni. Questo pungidito non è pertanto indicato per l'uso professionale nelle strutture sanitarie.



L'usura del materiale può provocare malfunzionamenti. In casi estremi la lancetta può spuntare dal cappuccio e non si possono escludere completamente eventuali lesioni accidentali. Maneggiare pertanto sempre con cautela il pungidito quando è inserito un caricatore di lancette.



Utilizzare il pungidito Accu-Chek FastClix Mobile esclusivamente con il caricatore di lancette Accu-Chek FastClix. L'uso di altre lancette o di altri caricatori di lancette può compromettere il funzionamento o danneggiare il pungidito.



Una volta tolto dal pungidito, il caricatore delle lancette ha un arresto interno che ne impedisce il riutilizzo. In tal modo si evita il pericolo di infezione.



Un arresto impedisce che il caricatore delle lancette ruoti quando la finestrella indica che è rimasta a disposizione 1 sola lancetta. Non forzare la levetta oltre questo arresto, poiché si potrebbe danneggiare il pungidito.

Inserimento del caricatore di lancette



Per poter eseguire il prelievo di sangue, è necessario inserire un caricatore di lancette nel pungidito.

1 Preparare un nuovo caricatore di lancette.

Un caricatore di lancette usato è riconoscibile dalla linea rossa presente sulla parte bianca. Non è possibile riutilizzare un caricatore di lancette usato.



2 Togliere il cappuccio dal pungidito.

Misurazione della glicemia



3 Inserire un nuovo caricatore di lancette nel pungidito – con la parte bianca in avanti.

Il caricatore di lancette è inserito correttamente quando scatta in sede con un CLIC.



4 Rimettere il cappuccio.

La rientranza sul bordo del cappuccio deve combaciare con la sporgenza dell'indicatore della profondità di puntura (linea argentata). Il cappuccio deve inserirsi con uno scatto percepibile. La finestrella indica il numero 6: sono cioè disponibili 6 lancette.

Impostazione della profondità di puntura





È possibile impostare 11 diverse profondità di puntura (da 0,5 a 5,5). La linea argentata (indicatore della profondità di puntura) sul pungidito indica la profondità di puntura impostata. Maggiore è il numero, maggiore è la profondità di puntura. I mezzi numeri sono marcati con un punto. La profondità di puntura 1,5 è impostata quando la linea è posizionata sul punto che si trova fra 1 e 2.

Se non si ha ancora esperienza con il pungidito, si consiglia di iniziare impostando una profondità di puntura bassa, p.es. livello 1.

 Ruotare il cappuccio del pungidito finché l'indicatore è sulla profondità di puntura desiderata.



Attendere ad eseguire il prelievo quando sarà richiesto nel corso delle istruzioni del manuale per l'uso.

Misurazione della glicemia

Preparazione di una nuova lancetta

Non è necessario preparare una lancetta nuova, se si è appena inserito un caricatore di lancette nuovo.

Se sono già stati eseguiti dei prelievi di sangue con il pungidito, è necessaria una nuova lancetta per il prelievo successivo. A questo scopo bisogna ruotare il caricatore di lancette nel pungidito.



Spostare la levetta laterale del pungidito a destra fino all'arresto (1) e poi di nuovo a sinistra (2).

Il caricatore di lancette ruota e porta la lancetta successiva nella posizione esatta pronta per l'uso.



La finestrella laterale del pungidito mostra una lancetta in meno, per es. 5 e non più 6. Quando viene posizionata la sesta ed ultima lancetta del caricatore, nella finestrella appare 1.

Sostituzione del caricatore di lancette usato



Quando è stata usata la sesta ed ultima lancetta, è necessario sostituire il caricatore di lancette.

1 Togliere il cappuccio dal pungidito.


- 2 Afferrare il caricatore di lancette nelle due incavature del pungidito.
- 3 Estrarre il caricatore di lacette dal pungidito.

I caricatori di lancette usati possono essere eliminati insieme ai normali rifiuti domestici.

4 Inserire un nuovo caricatore di lacette (vedere paragrafo "Inserimento del caricatore di lancette").

Misurazione della glicemia

Come sganciare e agganciare il pungidito

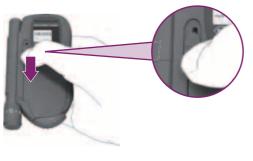


Se si desidera utilizzare il pungidito sganciato dal misuratore, procedere come segue:

Spingere fino in fondo in direzione della freccia il tasto cursore di sganciamento del pungidito (posto sul retro del misuratore). Tenere il tasto in questa posizione finché si toglie il pungidito.




2 Far scorrere e estrarre il pungidito dalla guida in direzione della freccia.



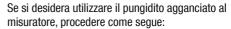

Sul misuratore e sul pungidito si trovano 2 binari guida. I binari guida del pungidito devono entrare perfettamente nei binari guida della nicchia del misuratore.

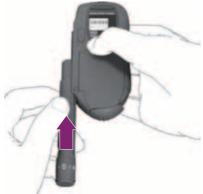

- 1 Posizionare il pungidito all'inizio del lato inferiore della nicchia, in modo che il pulsante multifunzionale sia rivolto verso l'alto e la scritta "Accu-Chek FastClix Mobile" guardi verso il misuratore.
- 2 Far scorrere il pungidito lungo il misuratore in direzione della freccia fino a udire il CLIC di agganciamento.

3.2 Esecuzione del test della glicemia

Una volta inserito un caricatore di lancette nel pungidito e aver impostato la profondità di puntura, è possibile eseguire il test della glicemia.

È possibile avviare il test della glicemia in due modi:

- aprendo lo sportello (a misuratore acceso o spento);
- accendendo il misuratore con il pulsante
 e selezionando la voce Eseguire il test nel menu (principale).

Dopo il test è possibile evidenziare il risultato, se si desidera ricordare che il test ha avuto luogo in condizioni particolari.

- Prima di iniziare il test, lavare le mani con acqua calda e sapone e asciugarle perfettamente. In tal modo si evita che sulla pelle siano presenti residui di cibo, bevande o creme che possono influenzare il test. Al tempo stesso si favorisce l'irrorazione sanguigna e si garantisce la necessaria pulizia del punto di prelievo.
 - Ad un certo punto il misuratore chiederà di applicare il campione di sangue. Da quel momento si hanno circa 2 minuti di tempo per prelevare una goccia di sangue e applicarla sulla zona reattiva. Se si supera quest'arco di tempo senza applicare il sangue, il misuratore si spegne automaticamente. La zona reattiva inutilizzata andrà persa, dato che il misuratore per il test successivo posizionerà una nuova zona reattiva.

Come avviare il test della glicemia aprendo lo sportello




1 Aprire lo sportello spingendo fino in fondo la superficie rigata nella direzione della freccia.

Dopo aver superato una leggera resistenza lo sportello scatta in sede.



Fare attenzione a non toccare il nastro, poichè si potrebbe danneggiarlo.

Se il misuratore era spento, ora si accende automaticamente.

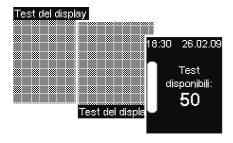

Il misuratore emette un segnale acustico (se *Segnali acus*. è attivato), esegue il test del display e quindi visualizza il numero dei test disponibili.

2 Durante il test del display, controllare che l'immagine a scacchiera non presenti errori.



Il misuratore trasporta quindi una zona reattiva sulla punta anteriore della cassetta.



Fare attenzione a non toccare il nastro, poichè si potrebbe danneggiarlo.

Non appena la zona reattiva è posizionata sulla punta della cassetta, sul display appare la richiesta *Applicare il sangue* e il misuratore emette un segnale acustico (se *Segnali acus*. è attivato).

È possibile aprire lo sportello anche quando il misuratore è già acceso. Il misuratore passa in questo caso a *Eseguire il test*. Trasporta una zona reattiva sulla punta anteriore della cassetta e sul display appare la richiesta *Applicare il sangue*.

Eccezioni:

- Si è nel menu Impostazioni: aprendo lo sportello sul display apparirà la domanda se veramente si desidera eseguire un test della glicemia (vedere capitolo 16.2).

Come avviare il test della glicemia tramite il menu (principale)



Menu
Eseguire II test
Spegnere
Memoria
Impostazioni
Altre funzioni
Seleziona



Accendere il misuratore con ,→ attendere il *Menu* (principale).

Se il misuratore è già acceso:

- Passare dal sottomenu visualizzato al menu (principale).
- 2 Selezionare con ✓ ★ Eseguire il test, → aprire con ✓ Eseguire il test.

Il display visualizza la richiesta Aprire sportello.

Se non si desidera eseguire il test, premere il pulsante (Annulla). In tal caso il misuratore non posiziona la zona reattiva e il numero dei test disponibili rimane invariato. Il misuratore torna al menu (principale).



3 Aprire lo sportello spingendo fino in fondo la superficie rigata nella direzione della freccia.



Fare attenzione a non toccare il nastro, poichè si potrebbe danneggiarlo.



Dopo aver aperto lo sportello, il misuratore trasporta una zona reattiva sulla punta anteriore della cassetta.



Fare attenzione a non toccare il nastro, poichè si potrebbe danneggiarlo.

Non appena la zona reattiva è posizionata sulla punta della cassetta, sul display appare la richiesta *Applicare il sangue* e il misuratore emette un segnale acustico (se *Segnali acus*. è attivato).

Esecuzione del prelievo di sangue



Utilizzare per ciascun prelievo una lancetta nuova. In tal modo si riduce il rischio d'infezione e il prelievo è praticamente indolore.



= punti consigliati per il prelievo di sangue

Per il prelievo di sangue sono generalmente adatte tutte le dita. Non sono adatte le dita che presentano infezioni alla pelle o all'unghia. Per il prelievo di sangue capillare si consiglia di pungere i lati dei polpastrelli, poiché questi punti sono meno sensibili al dolore (vedere parti evidenziate in nero nell'illustrazione qui a fianco).

La quantità di sangue che fuoriesce dipende dalla profondità di puntura e dalla pressione con la quale si applica il pungidito sulla cute.

- Se non dovesse fuoriuscire sangue a sufficienza, la volta successiva quando si esegue il test premere con più forza il pungidito sulla cute. Se ciò non dovesse bastare, aumentare gradualmente nei test successivi il livello della profondità di puntura.
- Se al contrario dovesse fuoriuscire troppo sangue, la volta successiva ridurre il livello della profondità di puntura.



Per poter eseguire il prelievo di sangue, è necessario caricare il puncidito.



Caricare il pungidito solo immediatamente prima del prelievo. Se il pungidito non viene usato e resta caricato, alcune parti potrebbero rovinarsi compromettendo il funzionamento.

Caricare il pungidito premendo il pulsante multifunzionale completamente fino in fondo.

Quando lo si rilascia, un terzo del pulsante fuoriesce nuovamente. Il pungidito è ora caricato.



Premere di nuovo il pulsante multifunzionale solo quando si desidera veramente eseguire il prelievo. Ora che il pungidito è caricato, la lancetta potrebbe essere rilasciata e procurare ferite involontarie.





Per eseguire il prelievo, il cappuccio del pungidito deve essere inserito. Senza cappuccio, la lancetta penetra troppo in profondità e la puntura è più dolorosa del necessario.

2 Premere **fermamente** il cappuccio contro il punto di prelievo prescelto.


Sulla pelle si sentirà un leggero rilievo sul cappuccio. Questo è il punto di uscita della lancetta.

3 Premere il pulsante multifunzionale completamente fino in fondo.

La lancetta viene rilasciata e penetra nella cute in base alla profondità di puntura impostata.

4 Se necessario, massaggiare delicatamente il dito in direzione del polpastrello per favorire la formazione della goccia di sangue.

Applicazione della goccia di sangue sulla zona reattiva

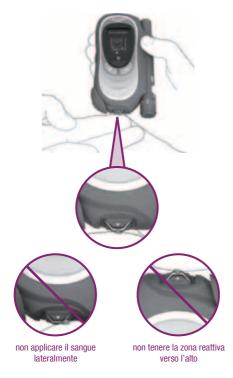

Tenere il misuratore in mano o metterlo su un piano, mentre si applica la goccia di sangue sulla zona reattiva.



Non tenere però il misuratore con la zona reattiva rivolta verso l'alto. Se si tiene la zona reattiva verso l'alto, il sangue può scorrere e sporcare l'interno del misuratore.

Quando sul display appare la richiesta *Applicare il sangue:*

 Avvicinare subito la goccia di sangue appena formata al centro della zona reattiva sulla punta della cassetta.

Toccare **lievemente** il nastro con il dito. La zona reattiva assorbirà la goccia di sangue.



2 Allontanare il dito dalla zona reattiva quando sul display appare il messaggio *Test in corso* con il simbolo della clessidra.

La zona reattiva ha assorbito sangue sufficiente e il misuratore emette un segnale acustico (se *Segnali acus*. è attivato). Il simbolo della clessidra indica che è in corso il test.

Il test si conclude dopo circa 5 secondi. Sul display appare il risultato e il misuratore emette un segnale acustico (se *Segnali acus*. è attivato). Contemporaneamente il misuratore memorizza il risultato. La zona reattiva usata viene spostata automaticamente dalla punta della cassetta.

Se si desidera evidenziare il risultato, non spegnere il misuratore. A questo proposito vedere il paragrafo "Come evidenziare i risultati".

Se non si desidera evidenziare il risultato, si può spegnere il misuratore (vedere pagina seguente).

Spegnimento del misuratore





Come spegnere tramite lo sportello

1 Chiudere lo sportello.

Il misuratore visualizzerà per informazione il numero dei test disponibili e poi si spegnerà.

Il display visualizza il risultato per almeno 15 secondi. Se si chiude lo sportello prima che sia trascorso quest'arco di tempo, il risultato continua ad essere visualizzato. Una volta trascorsi i 15 secondi, il display visualizzerà il numero dei test disponibili.




Tenere premuto il pulsante pe spegnere la strumento

Tenere premuto il pulsante per spegnere lo strumento

Come spegnere con il pulsante On/Off

Premere il pulsante On/Off pinché la barra a segmenti luminosi sul display è completa (almeno 2 secondi).

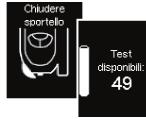



Prima di spegnersi, il misuratore richiede di chiudere lo sportello, dopodiché visualizza il numero dei test disponibili.

2 Chiudere lo sportello.

Simboli visualizzati insieme al risultato

Insieme al risultato possono essere visualizzati i seguenti simboli:





Le batterie si stanno esaurendo.



Durante il test la temperatura era al di fuori dell'intervallo consentito (da +10 a +40 °C). Nonostante l'avvertenza, si è deciso di procedere con il test.



È stato attivato l'intervallo ideale dei valori glicemici. Il risultato è al di sotto del limite inferiore o al di sopra del limite superiore dell'intervallo ideale impostato.



(low=basso) al posto di un risultato: il risultato è inferiore a 10 mg/dl (0,6 mmol/l).



Il simbolo LO può significare che il valore glicemico è troppo basso (eventuale ipoglicemia grave). In tal caso seguire subito le indicazioni raccomandate dal medico curante e ripetere il test.



(high=alto) al posto di un risultato: il risultato è superiore a 600 mg/dl (33,3 mmol/l). Ripetere il test.

Come evidenziare i risultati

Ciascun risultato può essere evidenziato da simboli che indicano caratteristiche o eventi particolari inerenti al risultato stesso. Il risultato può essere evidenziato finché appare sul display e si apre quindi il menu Evidenziare.







Nel menu Evidenziare sono disponibili 4 simboli:

- Test controllo (simbolo) per evidenziare i risultati dei controlli di funzionalità (sulla zona reattiva si applica la soluzione di controllo al posto del campione di sangue).
- Evento (simbolo ★): si può stabilire individualmente il significato dell'asterisco; per esempio, può indicare che il test è stato eseguito dopo aver praticato attività fisica oppure con sangue prelevato da un sito alternativo.

Nel menu *Evidenziare* oltre ai 4 simboli si trova la voce *Promemoria*. Questa voce consente di aprire subito dopo un test il menu *Promemoria*.

È possibile evidenziare contemporaneamente un risultato con i seguenti simboli:


- Evento e Prima pasto
- Evento e Dopo pasto.

Non è possibile evidenziare contemporaneamente un risultato con *Prima pasto* e *Dopo pasto*. Se uno dei due simboli è già attivato, attivando il secondo, il primo viene automaticamente disattivato.

Finché si è nel menu *Evidenziare*, è possibile modificare (attivare e disattivare) i simboli. Quando si esce dal menu *Evidenziare* (passando al menu (principale), selezionando *Promemoria* o *Test controllo* oppure spegnendo il misuratore), i simboli prescelti vengono memorizzati e non possono più essere modificati. Tramite la voce *Promemoria* del menu *Evidenziare* è possibile impostare un promemoria subito dopo aver eseguito un test, nel caso che si desideri verificare in seguito il risultato. Non è quindi necessario richiamare il menu (principale) o spegnere e riaccendere il misuratore, basta selezionare *Promemoria*.

Se si desidera evidenziare un risultato e impostare un promemoria, si deve in primo luogo evidenziare il risultato. Quando si seleziona *Promemoria*, si esce infatti dal menu *Evidenziare* e si entra nel menu *Promemoria*.

Quando si seleziona *Test controllo*, si esce dal menu *Evidenziare* e si entra nel menu *Sol. controllo*.

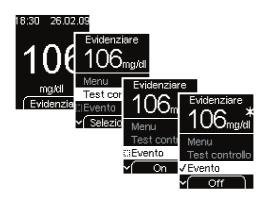

Le operazioni descritte qui di seguito iniziano dalla visualizzazione del risultato dopo un test della glicemia.

Evento, Prima pasto e Dopo pasto


1 Premere (Evidenzia).

Si apre il menu *Evidenziare*. Tutti i simboli per evidenziare sono disattivati. Un quadratino indica che il simbolo è disattivato, un segno di spunta **v** che è attivato.

- 2 Selezionare con 🔽 🛕 Evento, Prima pasto o Dopo pasto.
- 3 Premere (On).

Il simbolo attivato per evidenziare appare a destra accanto al risultato.

Se si desidera evidenziare il risultato con un altro simbolo, ripetere la procedura ai punti 2 e 3.

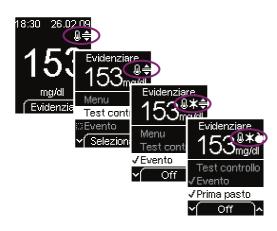

A destra accanto al risultato possono essere visualizzati 3 simboli. Se un risultato è evidenziato da 4 simboli, il simbolo

non viene visualizzato.

Esempio: Se durante il test la temperatura era troppo alta o troppo bassa e il risultato non rientra nell'intervallo ideale, il risultato sarà evidenziato automaticamente dai simboli ♣ e ♣ (vedere capitoli 16.2 e 4.6). Se si evidenzia questo risultato con *Evento* e *Prima pasto*, accanto al simbolo ♣ appariranno i simboli ★ e ♠, ma non più il simbolo ♠ (questo simbolo tuttavia non verrà cancellato).





Per cancellare un simbolo di evidenziazione:

- Selezionare con 🔽 \Lambda il simbolo, p.es. *Evento*.
- Premere (Off).



Evidenzi<u>are</u> Menu Test controllo ✓ Evento Seleziona





oppure

1b Selezionare con Menu (principale) e premere 🤊 (Seleziona).



Chiudere lo sportello.





- 1 Premere (Evidenzia).
- 2 Selezionare con Promemoria.
- Premere (Seleziona).

Si apre il menu *Promemoria*. Per maggiori informazioni vedere il capitolo 4.5.

Test controllo

- 1 Premere (Evidenzia).
- 2 Selezionare con 🔽 \Lambda Test controllo.
- 3 Premere (Seleziona).

La procedura per eseguire il controllo di funzionalità (test con la soluzione di controllo) è descritta al capitolo 7.2.



3.3 Interpretazione dei risultati



Se il risultato visualizzato dal display corrisponde allo stato percepito dal paziente, seguire le indicazioni del medico curante. Se il risultato visualizzato non corrisponde allo stato percepito dal paziente, eseguire un controllo di funzionalità del misuratore con la soluzione di controllo Accu-Chek Mobile (vedere capitolo 7). Ripetere quindi il test della glicemia. Se anche quest'ultimo risultato non dovesse corrispondere allo stato di salute percepito dal paziente, rivolgersi al medico curante.



Non modificare la terapia sulla base di un singolo risultato.

Intervallo di misura

Il misuratore misura i valori della glicemia in un intervallo compreso fra 10 e 600 mg/dl (0,6-33,3 mmol/l).



Se il risultato è inferiore a 10 mg/dl (0,6 mmol/l), al posto del risultato appare LO (low=basso).



Il simbolo LO può significare che il valore glicemico è troppo basso (eventuale ipoglicemia grave). In tal caso seguire subito le indicazioni raccomandate dal medico curante e ripetere il test.



Se il risultato è superiore a 600 mg/dl (33,3 mmol/l), al posto del risultato appare HI (high=alto). Ripetere il test.

Risultati non plausibili - possibili fonti d'errore

Se il misuratore continua a visualizzare risultati non plausibili o messaggi d'errore, verificare i punti elencati qui sotto.

Se la vostra risposta alle domande sotto riportate diverge dalla risposta indicata, correggete tale punto durante il prossimo test. Se sono stati osservati tutti i punti indicati e ciò nonostante sul display continuano ad apparire risultati non plausibili o messaggi d'errore, contattare il Servizio Assistenza.

Avete eseguito il test della glicemia seguendo correttamente le istruzioni del manuale per l'uso?	Sì
Avete lavato le mani con acqua calda e sapo- ne? Avete asciugato perfettamente le mani?	Sì
Avete massaggiato il dito premendo solo lievemente in direzione del polpastrello?	Sì

Avete applicato il sangue dopo che il display ha visualizzato la relativa richiesta?	Sì
Avete applicato la goccia di sangue sulla zona reattiva subito dopo che si è formata?	Sì
Avete eseguito il test nell'intervallo di temperatura consentito (10–40 °C)?	Sì
Avete osservato le condizioni di conservazione del misuratore e delle cassette test (vedere capitolo 15 e il foglietto illustrativo delle cassette test)?	Sì
Avete osservato le possibili fonti d'errore menzionate nel foglietto illustrativo delle cassette test?	Sì

Se il misuratore fosse caduto accidentalmente, è possibile che i risultati non siano plausibili o appaiano messaggi d'errore. Rivolgersi in tal caso al Servizio Assistenza.

4 Impostazioni

4.1 Schema generale delle impostazioni

Il misuratore dispone di diverse funzioni che possono essere utilizzate solo dopo aver effettuato le relative impostazioni. Tali funzioni servono in primo luogo a configurare il misuratore in base alle esigenze personali (p.es. segnali acustici e avvisi di promemoria).

Nelle 2 pagine seguenti è riportato uno schema generale delle impostazioni. Sono indicate anche le impostazioni predefinite in fabbrica con cui è stato inizialmente fornito il misuratore.

È possibile eseguire i test della glicemia anche senza effettuare impostazioni particolari del misuratore. In tal caso il misuratore funzionerà con le impostazioni predefinite in fabbrica.

Menu	Impostazione	Possibilità di selezione/impostazione		Impostazione predefinita	
Ora/Data	0ra			Ora Euro Centrale	•
	Data			Data cor	rente
	Formato ora (Formato per ora e data)	hh:mm * hh:mm hh:mm hh:mm am/pm hh:mm am/pm hh:mm am/pm hh:mm am/pm hh:mm	GG.MM.AA ** Giorno della settimana GG.MM. GG. Mese MM/GG/AA MM/GG Mese GG GG. Mese AA/MM/GG	hh:mm	GG.MM.AA

^{*} hh = ore, mm = minuti; p.es. 09:45 (hh:mm)

^{**} GG = Giorno, MM = Mese, AA = Anno; p.es. 25.11.09 (GG.MM.AA) oppure 11/25/09 (MM/GG/AA)

Menu	Impostazione	Possibilità di selezione/impostazione	Impostazione predefinita
Suoni/Avvisi	Segnali acus.	On o Off	On
	Promemoria	Segnali acustici On o Off	On
	Mod. acustica	On o Off	Off
Promemoria		10 Orari – promemoria giornalieri da impostare liberamente e/o promemoria singoli dopo un periodo di tempo prestabilito (1, 2 o 3 ore)	Nessuno
Interv. ideale		Valore limite inferiore e superiore / On o Off	Nessuno/Off
Volume		5 Livelli	Livello 3
Luminosità		3 Livelli	Livello 2
Lingua		15 Lingue diverse	English UK
Lingua		15 Lingue diverse	English UK

4.2 Apertura del menu Impostazioni





I pulsanti per effettuare le impostazioni sono descritti ai capitoli 1.5 e 1.9.

In fondo al manuale per l'uso è riportato uno schema completo dei menu disponibili.

Impostazioni Menu Ora/Data ✓ Suoni/Avvisi © Promemoria © Interv. ideale ✓ Seleziona

Impostazioni ∷Promemoria ∷Interv.ideale Volume Luminosità

Lingua Seleziona)^ Nel menu *Impostazioni* sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- *Menu:* per passare al menu (principale)
- Ora/Data: per impostare ora e data, per selezionare il formato di ora e data
- Suoni/Avvisi: per attivare/disattivare segnali acustici, promemoria e modalità acustica
- Promemoria: per impostare gli orari dei promemoria
- Interv. ideale: per impostare il valore limite inferiore e superiore dell'intervallo ideale
- Volume: per impostare il volume dei segnali acustici
- Luminosità: per impostare la luminosità del display
- Lingua: per impostare la lingua dei messaggi visualizzati.

4.3 Impostazione di ora e data, selezione del formato

Ora e data sono già preimpostate nel misuratore. Se si desidera utilizzare i promemoria o valutare i propri risultati con un computer, è importante controllare ora e data e correggerle nel caso in cui divergano da quelle correnti.

- Tutti i risultati vengono memorizzati con ora e data.
 Se ora e data non sono impostate correttamente, non sono possibili valutazioni temporali significative dei risultati.
- Se l'ora non è impostata correttamente e si utilizzano i promemoria, questi ricorderanno di eseguire il test ad un orario sbagliato.



Nel menu *Ora/Data* sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- *Menu:* per passare al menu (principale)
- Indietro: per tornare al menu Impostazioni
- Ora: per impostare l'ora
- Data: per impostare la data
- Formato ora: per impostare il formato di ora e data.

Impostazione dell'ora



Accendere il misuratore con → attendere il Menu (principale),

→ selezionare con ✓ ▲ Impostazioni,

→ aprire con ✓ Impostazioni,

→ selezionare con ✓ △ Ora/Data,

→ aprire con ✓ Ora/Data,

→ selezionare con ✓ △ Ora,

→ aprire con ✓ Ora.





Viene evidenziata l'indicazione delle ore.

Se è impostato il formato anglosassone a 12 ore, dopo l'ora appare *am* (ore dopo mezzanotte) o *pm* (ore dopo mezzogiorno).


Formato a 24 ore



Formato a 12 ore



- Impostare con 🔽 \Lambda le ore.
- 3 Premere (Avanti).

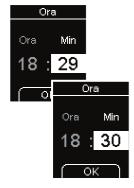



Viene ora evidenziata l'indicazione dei minuti.

- Impostare con 🔽 \Lambda i minuti.
- **5** Premere (OK o Avanti).

Formato a 24 ore

Formato a 12 ore



Solo per il formato a 12 ore:

Viene evidenziata l'indicazione am o pm.





Il misuratore visualizza quindi l'ora appena impostata.

6 Premere (*OK*).

Il misuratore torna al menu Ora/Data.

Impostazione della data





Formato ora

<u>Selezi</u>ona

Seleziona

Nell'impostazione della data, l'ordine di succesione di giorno, mese e anno dipende dal formato della data selezionato. A parte l'ordine di successione, la procedura d'impostazione è la stessa.

Sono possibili i sequenti ordini di successione:

- Giorno Mese Anno
- 2 Mese Giorno Anno
- 3 Anno Mese Giorno
 - Accendere il misuratore con .
 - → attendere il *Menu (principale)*,
 - → selezionare con Impostazioni,
 - → aprire con *Impostazioni*,
 - → selezionare con Ora/Data
 - → aprire con *Ora/Data*
 - → selezionare con Data,
 - → aprire con Data.







L'esempio seguente descrive l'impostazione della data secondo l'ordine di successione 1.

Viene evidenziato il giorno.

- 2 Impostare con 🔽 \Lambda il giorno.
- 3 Premere (Avanti).

Viene ora evidenziato il mese.

- 4 Impostare con 🔽 \Lambda il mese.
- **5** Premere (Avanti).

Viene ora evidenziato l'anno.


- 6 Impostare con 🔽 \Lambda l'anno.
- **7** Premere (*OK*).



Il misuratore visualizza quindi la data appena impostata. La data è visualizzata in base al formato della data impostato (vedi esempi qui a fianco).

8 Premere (*OK*).

Il misuratore torna al menu Ora/Data.

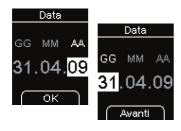

Se la data impostata non dovesse esistere (p.es. 31 Aprile), il misuratore torna dopo la conferma con *OK* dell'ultima immissione (punto 7) alla prima posizione d'immissione. Correggere la data prima che il misuratore l'accetti.

Selezione del formato di ora e data



Accendere il misuratore con → attendere il Menu (principale),

→ selezionare con ✓ ▲ Impostazioni,

→ aprire con ✓ Impostazioni,

→ selezionare con ✓ △ Ora/Data,

→ aprire con ✓ Ora/Data,

→ selezionare con ✓ △ Formato ora,

→ aprire con ✓ Formato ora.



Viene evidenziato il formato attualmente impostato.





- 2 Selezionare con il formato desiderato.
- 3 Premere (Seleziona).

Il misuratore visualizza quindi il formato di ora e data appena impostato.

4 Premere (*OK*).

Il misuratore torna al menu Ora/Data.

4.4 Impostazione di suoni e avvisi



Nel menu *Suoni/Avvisi* sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- *Menu:* per passare al menu principale
- *Indietro:* per tornare al menu *Impostazioni*
- Segnali acus.: per attivare e disattivare i segnali acustici
- Promemoria: per attivare e disattivare il segnale dei promemoria
- Mod. acustica: per attivare e disattivare la modalità acustica.

Segnali acustici: Se *Segnali acus*. è attivato (impostazione predefinita), durante il test viene emesso un segnale

- quando inizia il test del display,
- quando appare Applicare il sangue ed è possibile applicare il sangue o la soluzione di controllo sulla zona reattiva,
- quando appare *Test in corso* e il test ha inizio,
- quando appare il risultato,
- quando appare un messaggio d'errore (un doppio segnale acustico per 4 volte consecutive).

Promemoria: Qui è possibile attivare o disattivare i segnali acustici per i promemoria (vedere capitolo 4.5). Se la funzione *Promemoria* è attivata (impostazione predefinita), il misuratore emette i segnali acustici.

Modalità acustica: Se la modalità acustica è attivata (impostazione predefinita: Off), il misuratore guida l'utente nell'esecuzione del test della glicemia tramite i segnali acustici sopra elencati. Quando si conclude il test, il misuratore fornisce anche il risultato tramite un'altra sequenza di segnali. La descrizione della modalità acustica è riportata al capitolo 6.




Le persone ipovedenti possono utilizzare la modalità acustica solo se istruite compiutamente all'uso di tale modalità con il supporto di una persona vedente e sono definitivamente convinte di essere in grado di misurare correttamente senza eccezioni i propri valori glicemici tramite la modalità acustica. La modalità acustica deve essere utilizzata con la massima cautela: in caso contrario, l'utente può rischiare di interpretare erroneamente i risultati. Un errato dosaggio d'insulina basato sulla falsa interprezione dei

risultati può comportare notevoli danni alla salute e avere conseguenze fatali. In particolare, se con la modalità acustica si ottengono risultati glicemici fuori dalla norma, è necessario eseguire con l'aiuto di una persona vedente i controlli di funzionalità del misuratore per verificare tali risultati.


Le persone ipovedenti dovrebbero eseguire sempre il test della glicemia con il supporto di una persona vedente.

Attivazione e disattivazione di segnali acustici, promemoria e modalità acustica

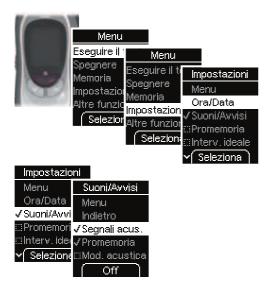

Segnali acus., Promemoria e Mod. acustica possono essere solo attivati e disattivati. La procedura è sempre uguale e viene pertanto spiegata una sola volta sull'esempio dei Segnali acus.



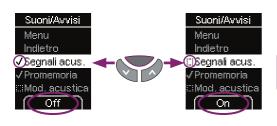

- Segno di spunta 🗸 significa attivato
- Quadratino significa disattivato.
- 2 Premere (On o Off) per attivare o disattivare i segnali acustici.

Il misuratore resta nel menu Suoni/Avvisi.

Se si desidera utilizzare la modalità acustica, è necessario attivare sia *Mod. acustica* che *Segnali acus.*

4.5 Impostazione dei promemoria



È possibile impostare fino a 10 orari di promemoria.

Quando il misuratore è spento, ogni giorno all'orario impostato il display visualizza "Promemoria" e l'ora del promemoria. Contemporaneamente il misuratore emette dei segnali acustici, se nel menu *Suoni/Avvisi* è stato attivato *Promemoria*.

Per spegnere il promemoria e i segnali acustici basta premere un pulsante qualsiasi. Se non si preme alcun tasto, il misuratore si spegne automaticamente dopo 20 secondi. Il promemoria non viene ripetuto.

Se viene eseguito un test della glicemia fino a 10 minuti prima del promemoria, il promemoria in questione decade.

Promemoria Menu Indietro Nuovo Modificare Fra 1 ora ✓ Seleziona

Promemoria Nuovo Modificare Fra 1 ora Fra 2 ore Fra 3 ore

Seleziona

Menu *Promemoria*, quando sono già impostati 10 promemoria.



Nel menu *Promemoria* sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- *Menu:* per passare al menu (principale)
- Indietro: per tornare al menu Impostazioni
- Nuovo: per impostare un nuovo orario per un promemoria quotidiano
- Modificare: per modificare l'orario di un promemoria già esistente (la voce appare quando è impostato almeno un orario)
- Fra 1 ora: per impostare un promemoria singolo fra 1 ora
- Fra 2 ore: per impostare un promemoria singolo fra 2 ore
- Fra 3 ore: per impostare un promemoria singolo fra 3 ore.

Nuovo, Fra 1 ora, Fra 2 ore e Fra 3 ore non vengono visualizzati se sono già impostati 10 orari promemoria.

Impostazione di un nuovo promemoria





Il quadratino prima di *Promemoria* significa che non è stato impostato ancora alcun promemoria oppure che tutti i promemoria sono disattivati. Il segno di spunta significa che almeno un promemoria è impostato ed anche attivato.



Dato che si imposta un nuovo orario di promemoria, al posto delle ore e dei minuti appaiono delle lineette.

Se non si desidera impostare alcun orario di promemoria, premere il pulsante (Annulla) per tornare al menu Promemoria.


Formato a 24 ore



Formato a 12 ore




Viene evidenziata l'indicazione delle ore.

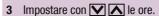

Quando si preme per la prima volta il pulsante, sul display appare 00:00 (formato a 24 ore) o 01:00 am (formato a 12 ore).

4 Premere (Avanti).

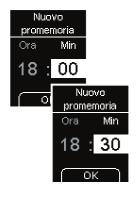



Viene ora evidenziata l'indicazione dei minuti.

- Impostare con 🔽 \Lambda i minuti.
- **6** Premere (*OK* o *Avanti*).

Formato a 24 ore

Formato a 12 ore



Solo per il formato a 12 ore:

Viene evidenziata l'indicazione am o pm.

6a Selezionare con **✓ △** *am* o *pm*. **6b** Premere **✓** (*OK*).

Nuovo
promemoria
impostato
18:30

Impostare
promemoria
Menu
Indietro
√18:30

Seleziona




Il misuratore visualizza quindi l'orario del promemoria appena impostato. Il promemoria viene attivato contemporaneamente.

7 Premere (*OK*).

Il misuratore torna al menu Impostare promemoria.

Modifica di promemoria esistenti (attivare/disattivare, modificare, cancellare)

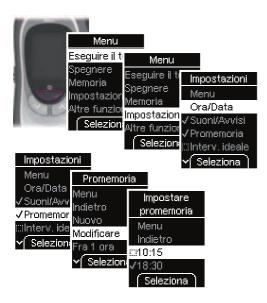



Il display visualizza la lista dei promemoria esistenti.

Un quadratino indica che il promemoria è disattivato, un segno di spunta viche è attivato.

- 2 Selezionare con i l'orario del promemoria che si desidera modificare.
- 3 Premere (Seleziona).

Promemoria
10:15

Disattivare
Modificare
Cancellare
V Seleziona

P

Car

Promemoria
10:15

Modificare
Cancellare
Annullare
Seleziona

Sotto l'orario sono riportate le seguenti possibilità di selezione:

- Disattivare per disattivare un promemoria attivato (l'orario rimane), oppure Attivare per attivare un orario disattivato
- *Modificare* per modificare un promemoria
- Cancellare per cancellare un promemoria
- Annullare se non si desidera effettuare modifiche al promemoria

Negli esempi seguenti vengono illustrati e descritti solo orari nel formato a 24 ore.



Come attivare o disattivare un promemoria

- 1 Selezionare con 🔽 \Lambda Attivare (Disattivare).
- 2 Premere (Seleziona).

Promemoria disattivato 10:15

OK

Promemoria

10:15

Disattivare

Modificare


Cancellare Seleziona

Il misuratore visualizza quindi l'orario del promemoria appena attivato o disattivato.

3 Premere (OK).

Il promemoria è ora attivato o disattivato.

Il misuratore torna al menu Impostare promemoria.

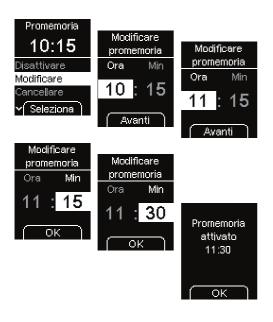

Come modificare un promemoria

- 1 Selezionare con Modificare.
- 2 Premere (Seleziona).
- 3 Impostare il nuovo orario per il promemoria (per la procedura vedere "Impostazione di un nuovo promemoria").

Il misuratore visualizza quindi l'orario del promemoria appena modificato.

4 Premere (*OK*).

L'orario del promemoria è ora modificato ed il promemoria contemporaneamente attivato.

Il misuratore torna al menu *Impostare promemoria*.

Promemoria 10:15

Disattivare Modificare

Cancellare





Come cancellare un promemoria

- 1 Selezionare con Cancellare.
- 2 Premere (Seleziona).

Il misuratore visualizza quindi l'orario del promemoria appena cancellato.

3 Premere (*OK*).

L'orario del promemoria è ora cancellato.

Il misuratore torna al menu *Impostare promemoria* o al menu *Promemoria*, se è stato cancellato l'ultimo promemoria.



Annullare - Come non modificare un promemoria

Se si decide di non modificare un promemoria selezionato, è possibile annullare l'operazione.


- 1 Selezionare con Annullare.
- 2 Premere (Seleziona).

Il misuratore torna al menu *Impostare promemoria* senza modificare il promemoria.

Impostazione di un promemoria singolo fra 1, 2 o 3 ore



Il misuratore può ricordare di eseguire un test con un singolo promemoria che si attiva dopo 1, 2 o 3 ore. In tal caso non è necessario impostare un orario. Questo tipo di promemoria è ad esempio utile se si desidera verificare un valore appena misurato. Una volta emesso. il promemoria viene cancellato automaticamente.

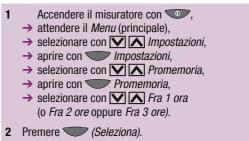



Il misuratore visualizza che il promemoria scatterà fra 1 ora (o fra 2 o 3 ore).

3 Premere (OK).

Il misuratore torna al menu *Impostare promemoria*.

Il promemoria singolo appare nella lista dei promemoria come ogni altro promemoria, ovvero con l'orario in cui è avvenuto e non per esempio come "Fra 1 ora".

Come cancellare un promemoria singolo







Il display visualizza la lista dei promemoria esistenti.

Un quadratino ... indica che il promemoria è disattivato, un segno di spunta **v** che è attivato.

- 2 Selezionare con M A l'orario del promemoria che si desidera cancellare.
 - B Premere (Seleziona).





Sotto l'orario di un promemoria singolo sono riportate **solo** le seguenti possibilità di selezione:

- Cancellare per cancellare questo promemoria
- Annullare se non si desidera cancellare questo promemoria.

Diversamente dai promemoria quotidiani, non è possibile attivare o disattivare o modificare l'orario dei promemoria singoli.

- 4 Selezionare con Cancellare.
- **5** Premere (Seleziona).

Il misuratore visualizza quindi l'orario del promemoria appena cancellato.

6 Premere (*OK*).

L'orario del promemoria è ora cancellato.

Il misuratore torna al menu *Impostare promemoria* o al menu *Promemoria*, se è stato cancellato l'ultimo promemoria.

4.6 Impostazione dell'intervallo ideale

É possibile impostare l'intervallo ideale individuale dei propri valori glicemici (impostazione predefinita: Off). I risultati al di sotto o al di sopra di questo intervallo ideale, vengono evidenziati con il simbolo \(\frac{\infty}{\infty}\).

L'intervallo ideale comprende i valori glicemici che dovrebbero risultare quando la terapia funziona in modo ottimale. Stabilire insieme al medico curante un intervallo ideale mirato.

Per impostare l'intervallo ideale è necessario definire un valore limite inferiore ed un valore limite superiore. Il valore limite inferiore può essere impostato fra 50 e 100 mg/dl (fra 2,8 e 5,5 mmol/l). Il valore limite superiore può essere impostato fra 100 e 200 mg/dl (fra 5,5 e 11,1 mmol/l). Entrambi i valori limite possono essere impostati con incrementi di 1 mg/dl (0,1 mmol/l).



Se si desidera utilizzare il valore limite inferiore come avviso per una possibile ipoglicemia (glicemia bassa), tener presente quanto segue: l'avviso è affidabile solo se il valore limite è definito correttamente. Si raccomanda pertanto di impostare il valore limite solo in accordo con il proprio medico curante. Questa funzione non sostituisce l'addestramento del paziente da parte del medico curante o del team diabetologico per i casi di ipoglicemia.

Impostazione dell'intervallo ideale





Un quadratino indica che l'intervallo ideale è disattivato, un segno di spunta d'che è attivato.





Se fino a questo momento non era mai stato impostato un intervallo ideale, si arriva direttamente all'immissione dei due valori limite. Al posto dei due valori limite appaiono delle lineette.

Se non si desidera impostare alcun valore limite, premere il pulsante (Annulla) per tornare al menu Impostazioni.





OK



OK

2 Impostare con il valore limite inferiore.

Quando si preme per la prima volta il pulsante, sul display appare l'impostazione predefinita di 70 mg/dl (3.9 mmol/l).

3 Premere (Avanti).

Per il valore limite superiore appare l'impostazione predefinita di 140 mg/dl (7,8 mmol/l).

- 4 Impostare con 🔽 \Lambda il valore limite superiore.
- **5** Premere (*OK*).

Il misuratore visualizza quindi l'intervallo ideale appena impostato. L'intervallo ideale viene attivato contemporaneamente.

6 Premere (*OK*).

Il misuratore torna al menu *Impostazioni*.

Modifica dell'intervallo ideale esistente (attivare/disattivare, modificare)





:::Promemoria √Interv.ideale Seleziona



Seleziona

Quando è già stato impostato un intervallo ideale, nel menu sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- *Disattivare* per disattivare l'intervallo ideale (i valori limite impostati rimangono), oppure Attivare per attivare l'intervallo ideale
- Modificare per modificare i valori limite.
- Annullare se non si desidera effettuare modifiche all'intervallo ideale



∨ Seleziona Ì




Come attivare e disattivare l'intervallo ideale

- 1 Selezionare con Disattivare (Attivare).
- 2 Premere (Seleziona).

Il misuratore visualizza quindi l'intervallo ideale appena disattivato (o attivato).

3 Premere (*OK*).

Il misuratore torna al menu Impostazioni.

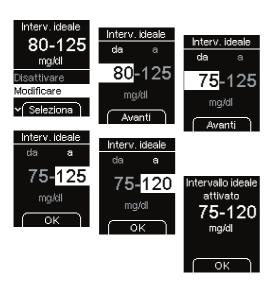

Come modificare l'intervallo ideale

- 1 Selezionare con Modificare.
- 2 Premere (Seleziona).
- 3 Impostare il nuovo intervallo ideale (per la procedura vedere "Impostazione dell'intervallo ideale").

Il misuratore visualizza quindi l'intervallo ideale appena modificato.

4 Premere (OK).

L'intervallo ideale è ora modificato e contemporaneamente attivato.

Il misuratore torna al menu Impostazioni.




Annullare - Come non modificare l'intervallo ideale

Se si decide di non modificare l'intervallo ideale, è possibile annullare l'operazione.

- 1 Selezionare con Annullare.
- 2 Premere (Seleziona).

Il misuratore torna al menu *Impostazioni* senza modificare l'intervallo ideale.

4.7 Impostazione del volume

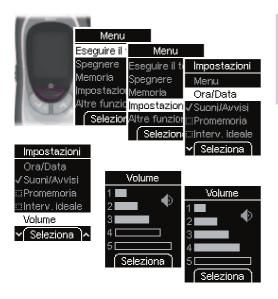

Il volume dei segnali acustici può essere impostato su 5 diversi livelli.

Accendere il misuratore con →,

→ attendere il Menu (principale),

→ selezionare con ✓ ▲ Impostazioni,

→ aprire con ✓ Impostazioni,

→ selezionare con ✓ ▲ Volume,

→ aprire con ✓ Volume.

Più si riempiono i segmenti sul display, più alto è il volume. L'impostazione predefinita è sul livello 3.

2 Impostare con 🔽 \Lambda il volume.

Ad ogni pressione del pulsante viene emesso un segnale acustico nel volume prescelto.

3 Premere (Seleziona).



Il misuratore visualizza quindi il volume appena impostato.

4 Premere (OK).

Il misuratore torna al menu Impostazioni.

4.8 Impostazione della luminosità




La luminosità dei testi e dei simboli che appaiono sul display può essere impostata su 3 diversi livelli.



Impostazioni
✓ Suoni/Avvisi
© Promemoria
© Interv. ideale
Volume
Luminosità

Seleziona 🔼

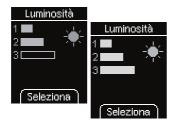

Più si riempiono i segmenti sul display, maggiore è il livello di luminosità. L'impostazione preimpostata è sul livello 2.

2 Impostare con 🔽 \Lambda la luminosità.

La luminosità del display viene regolata in base alla scelta effettuata.

3 Premere (Seleziona).



Il misuratore visualizza quindi la luminosità appena impostata.

4 Premere (*OK*).

Il misuratore torna al menu Impostazioni.

4.9 Impostazione della lingua

I testi sul display possono essere visualizzato in 15 lingue diverse. Quando si accende il misuratore per la prima volta, è necessario impostare la lingua desiderata. Se in seguito si desidera modificare la propria scelta, è possibile impostare una delle seguenti lingue:

- English US
- English UK
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Français
- Dansk
- Svenska

- ■にほんご
- Türkçe
- Português
- Ελληνικά
- Norsk
- Suomi
- Nederlands



1 Accendere il misuratore con ,

→ attendere il Menu (principale),

→ selezionare con | Impostazioni,

→ aprire con | Impostazioni,

→ selezionare con | Impostazioni,

→ aprire con | Lingua,

→ aprire con | Lingua.

Viene evidenziata la lingua attualmente impostata.

- 2 Selezionare con 🔽 \Lambda la lingua desiderata.
- Premere .

Il misuratore visualizza quindi la lingua appena selezionata.


4 Premere (OK).

Il misuratore torna al menu Impostazioni.

Come correggere una lingua impostata erroneamente

Se erroneamente è stata impostata una lingua diversa da quella desiderata, forse in seguito non si è più in grado di leggere i menu. Con la seguente procedura è possibile modificare nuovamente la lingua.

1 Accendere il misuratore con .

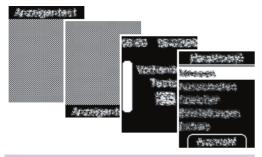

2 Attendere finché scorre la sequenza di visualizzazioni illustrate qui sopra e il display non cambia più.

L'ultimo display (a destra) è il menu (principale), dove appare il testo nella lingua erroneamente impostata.

Premere 3 volte il pulsante 🔽.

Ora è evidenziato il menu "Impostazioni".

- 4 Premere ...
- **5** Premere 6 volte il pulsante **\(\sqrt{}**.

Ora è evidenziato il menu "Lingua" (ultima voce).

6 Premere ...

Si apre il menu "Lingua".

- 7 Selezionare con 🔽 \Lambda la lingua desiderata.
- 8 Premere .

Il misuratore visualizza quindi la lingua appena selezionata.

9 Premere ...

Il misuratore torna al menu "Impostazioni".

5 Il misuratore come diario elettronico

Il misuratore è in grado di memorizzare sino a 500 risultati con ora e data. Non bisogna far nulla per salvare i risultati. Il misuratore li memorizza tutti automaticamente. Oltre al risultato, all'ora e alla data, il misuratore memorizza anche tutte le altre informazioni importanti relative al test. Per informazioni s'intendono tutti quei simboli che al termine del test appaiono insieme al risultato (tranne il simbolo della batteria) ed i simboli con cui il risultato è stato evidenziato.

Memoria Menu Tutti i valori Media dei valori Trasfer, dati Formato visual, Seleziona Nel menu *Memoria* sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:


- *Menu:* per passare al menu (principale)
- Tutti i valori: per visualizzare tutti i risultati visualizzati
- Media dei valori: per visualizzare la media dei risultati degli ultimi 7, 14 o 30 giorni
- Trasfer. dati: per trasferire i risultati (ad un computer, un palmare o un sistema di valutazione specifico)
- Formato visual.: per selezionare il tipo di visualizzazione dei risultati memorizzati.

5.1 Richiamo dei risultati memorizzati

È possibile richiamare i risultati memorizzati in due modi:

- tramite il menu Memoria
- con il pulsante



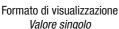



Formato di visualizzazione Lista valori

I risultati possono essere visualizzati in due formati: come *Valore singolo* e come *Lista valori*. L'impostazione predefinita è *Valore singolo*. Per modificare il formato di visualizzazione dei risultati vedere il capitolo 6.4.

I simboli memorizzati insieme al risultato appaiono a destra accanto al risultato. Nel formato di visualizzazione *Valore singolo* possono essere visualizzati 4 simboli, nel formato *Lista valori* solo 3. Se il risultato è contrassegnato da 4 simboli, il simbolo ♣ (valore fuori dall'intervallo ideale) non viene visualizzato nel formato *Lista valori*.





Formato di visualizzazione Formato di visualizzazione Valore singolo Lista valori

L'ultimo (il più recente) risultato in memoria appare come XXX o XX insieme a delle lineette al posto di data e ora:

Questa visualizzazione sul display significa che l'ultimo test non ha fornito alcun risultato. In tal caso durante l'ultimo test è stato visualizzato un messaggio d'errore oppure alla richiesta *Applicare il sangue* non è stato applicato il sangue (o la soluzione di controllo). Dopo il test successivo che fornisce un risultato, il risultato visualizzato come X verrà cancellato dalla memoria.





Formato di visualizzazione Formato di visualizzazione Valore singolo Lista valori

Se non sono presenti risultati in memoria, verranno visualizzati solo *Tutti i valori* e *OK*.

Tramite il menu Memoria



Per richiamare i risultati memorizzati tramite il menu *Memoria:*

Accendere il misuratore con ,

- → attendere il *Menu* (principale),
- → selezionare con **M** Memoria,
- → aprire con *Memoria*,
- → selezionare con **T T Utti** i valori,
- → aprire con Tutti i valori.





Formato di visualizzazione Formato di visualizzazione Valore singolo Lista valori

Viene visualizzato l'ultimo risultato memorizzato, nel formato di visualizzazione *Valore singolo* o *Lista valori* a seconda dell'impostazione.

Il comando per il pulsante • è OK.

Le istruzioni per visualizzare tutti i risultati memorizzati sono riportate al paragrafo "Visualizzazione di tutti i risultati memorizzati".

Per uscire dai risultati memorizzati:

Premere (OK).

Il misuratore torna al menu Memoria.

Con il pulsante 🔽 (Giù)



Per richiamare i risultati memorizzati con il pulsante **\(\subseteq \)**: Se il misuratore è spento:

Premere finché il misuratore si accende (più di 2 secondi).



Tutti i valori

138 mg/dl
13:07 26:02:09
07:36 26:02:09
20:18 25:02:09

Formato di visualizzazione Formato di visualizzazione Valore singolo Lista valori

Viene visualizzato l'ultimo risultato memorizzato, nel formato di visualizzazione *Valore singolo* o *Lista valori* a seconda dell'impostazione.

Il comando per il pulsante * è Off.


Le istruzioni per visualizzare tutti i risultati memorizzati sono riportate al paragrafo "Visualizzazione di tutti i risultati memorizzati".

Per uscire dai risultati memorizzati:

Premere (Off).

Il misuratore si spegne.

Visualizzazione di tutti i risultati memorizzati

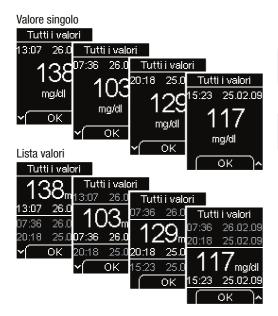

Non importa in quale modo si richiamano i risultati memorizzati (tramite il menu *Memoria* o con il pulsante \(\subseteq \), in ogni modo si visualizzano tutti i risultati memorizzati.

Per richiamare valori precedenti:

1 Premere per passare al risultato immediatamente precedente.

Per tornare infine ai risultati più recenti:

Premere per passare al risultato immediatamente successivo.

Tenendo premuto il pulsante, i risultati scorrono rapidamente (all'inizio piano, poi velocemente). La visualizzazione sul display si ferma sul risultato più vecchio e sul risultato più recente (l'ultimo).

5.2 Visualizzazione della media dei valori

Il misuratore può calcolare diverse medie dei valori sulla base dei risultati memorizzati.

È possibile scegliere con quali risultati deve essere calcolata la media:

- tutti i risultati
- solo i risultati evidenziati con il simbolo *Prima pasto*
- solo i risultati evidenziati con il simbolo *Dopo pasto*.

Dopodiché si sceglie l'arco di tempo in cui sono sono stati misurati i valori:

- utlimi 7 giorni
- utlimi 14 giorni
- utlimi 30 giorni.

La media dei valori è calcolata sulla base di tutti i risultati che corrispondono alla selezione effettuata. Nel calcolo non vengono tuttavia inclusi i seguenti risultati:

- controlli di funzionalità (evidenziati con 🏝),
- risultati evidenziati con **★** (Evento),
- risultati visualizzati con LO o HI,







Nel menu *Media dei valori* sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- *Menu:* per passare al menu (principale)
- Indietro: per tornare al menu Memoria
- Tutti i valori: per calcolare la media includendo tutti i risultati
- Prima pasto: per calcolare la media includendo solo i risultati evidenziati dal simbolo Prima pasto
- Dopo pasto: per calcolare la media includendo solo i risultati evidenziati dal simbolo Dopo pasto





- 2 Selezionare con Tutti i valori, Prima pasto o Dopo pasto.
 - Premere (Seleziona).
- 4 Selezionare con Al l'arco di tempo in cui sono stati misurati i valori: 7, 14 o 30 giorni.

La selezione dell'arco di tempo definisce solo la media dei valori che viene visualizzata per prima. Successivamente è possibile passare direttamente dall'arco di tempo prescelto agli altri.

5 Premere (Seleziona).

Viene visualizzata la media dei valori selezionata, così come il numero dei risultati con cui è stata calcolata la media (indicati come N. test).







- 6 Premere **▼** per passare dalla media di 7 giorni a quella di 14 e poi a quella di 30 giorni.
- 7 Premere per tornare dalla media di 30 giorni a quella di 14 e poi a quella di 7 giorni.
 - 8 Premere (*OK*).

Il misuratore torna al menu Media dei valori.





La media dei valori *Prima pasto* è evidenziata con il simbolo .

La media dei valori *Dopo pasto* è evidenziata con il simbolo **d**.

- Il misuratore calcola la media dei valori per un determinato arco di tempo anche quando i risultati memorizzati coprono un periodo di tempo più breve. Esempio: soltanto negli ultimi 5 giorni sono stati eseguiti dei test della glicemia. Con i risultati di questi 5 giorni viene calcolata la media dei valori per tutti e tre i periodi di tempo (7, 14 e 30 giorni).
- Se non è possibile calcolare la media dei valori, al posto del valore apparirà XX e al posto del numero dei risultati (N. test) apparirà uno zero. Ciò si verifica nei casi in cui non sono stati memorizzati risultati nell'arco di tempo prescelto oppure in memoria sono presenti solo risultati che non possono essere inclusi nel calcolo della media dei valori.
- Se si modifica la data o l'ora, poi si esegue un test e quindi si rimette la data o l'ora, il misuratore includerà nel calcolo della media solo i risultati memorizzati nell'ordine cronologico non interrotto. Se l'ordine cronologico è stato interrotto, i risultati precedenti vengono ignorati. Se dalla modifica non è stato eseguito alcun test della glicemia, al posto del valore apparirà XX e al posto del numero dei risultati (N. test) apparirà uno zero.

5.3 Trasferimento dei risultati

Il misuratore dispone di un'interfaccia a infrarossi integrata (secondo lo standard IrDA = Infrared Data Association) che consente il trasferimento senza fili dei risultati verso un computer, un palmare o un sistema di valutazione specifico.

L'interfaccia a infrarossi si trova nel coperchio del vano batteria del misuratore.



Interfaccia a infrarossi

Vi sono due possibilità per trasferire i risultati:

- con i prodotti specifici Roche Diagnostics che possono anche analizzare i dati,
- oppure in forma di una tabella che può essere elaborata p. es. con un programma di foglio di calcolo.

Roche Diagnostics offre una serie di specifici prodotti hardware e software per ampliare le funzioni di diario elettronico integrate nel misuratore. Questi prodotti consentono al paziente e al medico di gestire in modo ottimale i risultati, e al paziente di comprendere meglio i propri risultati con l'aiuto di grafici e tabelle.

In base al tipo di analisi che s'intende effettuare sono necessari un programma software specifico e/o specifici prodotti hardware. Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Assistenza.

Se si possiede già da tempo un prodotto software o hardware di Roche Diagnostics che consente di trasferire e valutare i risultati, è possibile che questo non riconosca i misuratori più nuovi e che quindi i risultati non possano essere trasferiti. Probabilmente è necessario un aggiornamento della versione del prodotto software o hardware in possesso. Rivolgersi in tal caso al Servizio Assistenza.

I risultati restano memorizzati nel misuratore anche dopo il loro trasferimento.

Durante il trasferimento dei risultati non è possibile eseguire alcun test.

È possibile aprire il menu *Trasfer. dati* in due modi:

- con i pulsanti 🔽 e 🔼
- tramite il menu Memoria.

Nel menu *Trasfer. dati* è possibile scegliere il modo in cui si desidera trasferire i risultati.




Nel menu *Trasfer. dati* sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- Menu: per passare al menu (principale) (solo nel caso in cui il menu è stato aperto dal menu Memoria)
- Indietro: per tornare al menu Memoria (solo nel caso in cui il menu è stato aperto dal menu Memoria)
- Per analisi: per trasferire i risultati con prodotti hardware o software di Roche Diagnostics
- *Tabella al PC:* per trasferire i risultati in formato tabella ad un personal computer

Come avviare il trasferimento con i pulsanti 🔽 e \Lambda



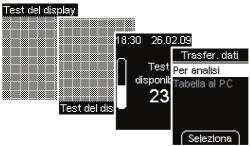

Se il misuratore è spento:

Premere contemporaneamente i pulsanti **?** e **.** finchè il misuratore si accende (più di 2 secondi).

Dopo il test del display ed il numero dei test disponibili appare il menu *Trasfer. dati.*

Come avviare il trasferimento tramite il menu Memoria







Trasferimento dei risultati per la valutazione



- Leggere le istruzioni del programma software o dell'hardware in uso. Le istruzioni riportano tutte le informazioni relative al trasferimento dei dati.
- 2 Preparare il dispositivo ricevente (programma software o hardware) al trasferimento dei risultati.
- 3 Posizionare il misuratore a 5–20 cm di distanza dall'interfaccia a infrarossi del dispositivo ricevente. Puntare le due interfacce a infrarossi una verso l'altra.

4 5

ndietro

Per analisi

Tabella al PC

Seleziona

- Nel menu *Trasfer. dati:* Selezionare con Per analisi.
- 5 Premere (Seleziona) per avviare il trasferimento dei risultati.





6 Se necessario, avviare il trasferimento dei risultati dal dispositivo ricevente (programma software o hardware).

Il display visualizza lo stato del trasferimento dei risultati.

Se si decide di non trasferire i risultati, annullare il trasferimento premendo il pulsante (Annulla). Il misuratore torna al menu Memoria (se si è partiti da tale menu) oppure si spegne (se si è acceso il misuratore con i pulsanti ().

Terminato il trasferimento dei risultati, il misuratore si spegne automaticamente dopo circa 2 secondi.

Trasferimento dei risultati in formato tabella

Il misuratore può trasferire i risultati ad un computer senza l'ausilio di hardware o software specifici. Unica condizione richiesta è che il computer sia dotato di un'interfaccia a infrarossi secondo lo standard IrDA (IrDA = Infrared Data Association).

I risultati vengono trasferiti come file CSV. CSV sta in questo caso per *Comma Separated Values*, dato che i singoli valori sono separati da punto e virgola.

I file CSV possono essere fra l'altro aperti con editor di testo o programmi di foglio di calcolo.

La posizione in cui si trova il file CSV sul proprio computer dipende dalle impostazioni del sistema operativo per il trasferimento senza fili di file tramite l'interfaccia a infrarossi.

Il file CSV contiene sempre tutti i risultati presenti nella memoria del misuratore. I risultati che sono stati già trasmessi in precedenza vengono nuovamente trasferiti.

Il file CSV contiene le seguenti informazioni:

- Numero di serie: numero di serie del misuratore
- Data del trasferimento (GG.MM.AAAA), Ora del trasferimento (hh:mm): data e ora in cui sono stati trasferiti i risultati dal misuratore al computer
- Data (GG.MM.AAAA), Ora (hh:mm), Risultato e Unità di misura dei risultati memorizzati nel misuratore
- Simboli, con i quali sono stati evidenziati i risultati, indicati da una "X".

Nel file CSV la data è sempre visualizzata nel formato GG.MM.AAAA e l'ora sempre nel formato 24 ore (hh:mm). Il formato di ora/data impostato nel misuratore non ha alcuna influenza sul formato di data/ora del file CSV.

File CSV aperto in un editor di testo

Numero di serie;Data del trasferimento;Ora del trasferimento 123456789:10.05.2009:09:18

Data;Ora;Risultato;Unità;Avvertenza di temperatura;Fuori dal intervallo ideale;Evento;Prima pasto;Dopo pasto;Test di controllo

10.05.2009;08:21;117 (6.5);mg/dl (mmol/l);;;;; 09.05.2009;18:05;128 (7.1);mg/dl (mmol/l);;;;; 09.05.2009;12:37;135 (7.5);mg/dl (mmol/l);;;X;;; 09.05.2009;08:16;112 (6.2);mg/dl (mmol/l);;;;X;; 08.05.2009;18:39;57 (3.2);mg/dl (mmol/l);;;;;X

File CSV aperto in un programma di foglio di calcolo (esempio)

Numero di serie				Data del trasferimento	Ora del trasferimento				
123456789				10.05.2009	09:18				
Data	0ra	Risultato	Unità	Avvertenza di temperatura	Fuori dal intervallo ideale	Evento	Prima pasto	Dopo pasto	Test di controllo
10.05.2009	08:21	117 (6.5	mg/dl mmol/l)						
09.05.2009	18:05	128 (7.1	mg/dl mmol/l)						
09.05.2009	12:37	135 (7.5	mg/dl mmol/l)		X				
09.05.2009	08:16	112 (6.2	mg/dl mmol/l)				X		
08.05.2009	18:39	57 (3.2	mg/dl mmol/l)						Х



- 1 Accendere il computer.
- 2 Posizionare il misuratore a 5–20 cm di distanza dall'interfaccia a infrarossi del computer. Puntare le due interfacce a infrarossi una verso l'altra.

- Nel menu *Trasfer. dati:* Selezionare con **T**
- 4 Premere il pulsante (Seleziona) per avviare il trasferimento dei risultati.





Il display visualizza lo stato del trasferimento dei risultati.

Il misuratore come diario elettronico

Se si decide di non trasferire i risultati, annullare il trasferimento premendo il pulsante (Annulla). Il misuratore torna al menu Memoria (se si è partiti da tale menu) oppure si spegne (se si è acceso il misuratore con i pulsanti



Terminato il trasferimento dei risultati, il misuratore si spegne automaticamente dopo circa 2 secondi.

Se il trasferimento fallisce

Se i risultati non vengono trasmessi, il misuratore si spegne automaticamente dopo circa 60 secondi.

Il trasferimento può essere fallito per i seguenti motivi:

- Si è verificato un errore durante il trasferimento.
 Avviare nuovamente il trasferimento dei risultati.
- Le interfacce a infrarossi sono troppo distanti fra loro oppure non sono rivolte correttamente l'una verso l'altra.
 - Ridurre la distanza a 5–20 cm fra le due interfacce a infrarossi e posizionarle esattamente una di fronte all'altra. Avviare nuovamente il trasferimento dei risultati.

- Un altro dispositivo con la porta a infrarossi accesa o una fonte luminosa molto forte si trova troppo vicino a una delle due interfacce a infrarossi.
 Allontanare il dispositivo o la fonte luminosa e avviare nuovamente il trasferimento dei risultati.
- Il contatto fra le interfacce a infrarossi è ostacolato p.es. da un oggetto.
 Allontanare l'oggetto e avviare nuovamente il trasferimento dei risultati
- Si è verificato un errore nel dispositivo ricevente.
 Leggere il relativo manuale per l'uso.

5.4 Impostazione del formato di visualizzazione dei risultati memorizzati

I risultati memorizzati possono essere visualizzati (menu *Memoria - Tutti i valori*) in due modi: come *Valore singolo* e come *Lista valori*.

Formato di visualizzazione Valore singolo



Formato di visualizzazione *Valore singolo* (impostazione predefinita):

In questo formato il display visualizza un risultato. Sopra il risultato (qui 129 mg/dl) appaiono l'ora e la data del test.

Formato di visualizzazione Lista valori



Formato di visualizzazione Lista valori:

In questo formato il display visualizza tre risultati. Il valore selezionato è in evidenza fra due linee. Il risultato viene visualizzato solo per questo valore selezionato. L'ora e la data sono riportate sotto il risultato. Degli altri due valori vengono visualizzate solo ora e data. Sopra il risultato selezionato si trovano i risultati più recenti, sotto i più vecchi.



1 Accendere il misuratore con →,

→ attendere il Menu (principale),

→ selezionare con ✓ ▲ Memoria,

→ aprire con ✓ Memoria,


→ selezionare con ✓ ▲ Formato visual.,

→ aprire con ✓ Formato visual.

- 2 Selezionare con il formato di visualizzazione desiderato.
- 3 Premere (Seleziona).

Per il formato selezionato viene visualizzato un esempio.

4 Premere il pulsante (Avanti).

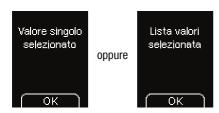


Il misuratore visualizza quindi il formato di visualizzazione appena selezionato.



Il misuratore torna al menu Memoria.



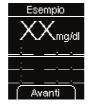

Se non sono presenti risultati in memoria, al posto del risultato appare una X e al posto dell'ora e della data delle lineette.

6 Modalità acustica

Per attivare la modalità acustica vedere il capitolo 4.4. Se la modalità acustica è attivata, il misuratore accompagna il test con una serie di segnali acustici e fornisce il risultato tramite un'altra sequenza di segnali acustici. Il misuratore emette inoltre dei segnali acustici quando le batterie sono quasi esaurite, la cassetta test è vuota o il display visualizza un messaggio d'errore. I risultati memorizzati non sono accompagnati acusticamente quando vengono richiamati dalla memoria.

Per riconoscere con sicurezza il risultato è di fondamentale importanza saper bene come viene rappresentato in segnali acustici e come poterlo distinguere da altri tipi di segnali.

Nei paragrafi successivi è riportata una descrizione dettagliata dei segnali acustici. Presso il Servizio Assistenza è inoltre possibile ordinare un CD con il programma "BeepLearn" che consente di esercitarsi ad interpretare i risultati comunicati dal misuratore in forma di segnali acustici.



Le persone ipovedenti possono utilizzare la modalità acustica solo se istruite compiutamente all'uso di tale modalità con il supporto di una persona vedente e sono definitivamente convinte di essere in grado di misurare correttamente senza eccezioni i propri
valori glicemici tramite la modalità acustica.
La modalità acustica deve essere utilizzata
con la massima cautela: in caso contrario,
l'utente può rischiare di interpretare erroneamente i risultati. Un errato dosaggio
d'insulina basato sulla falsa interprezione
dei risultati può comportare notevoli danni
alla salute e avere conseguenze fatali. In
particolare, se con la modalità acustica si
ottengono risultati glicemici fuori dalla
norma, è necessario eseguire con l'aiuto di
una persona vedente i controlli di funzionalità del misuratore per verificare tali risultati.

Le persone ipovedenti dovrebbero eseguire sempre il test della glicemia con il supporto di una persona vedente.

Le parti esterne del misuratore devono essere controllate regolarmente da una persona vedente perchè non presentino tracce di sporco.

Modalità acustica

Ci sono due tipi di segnali acustici che si differenziano tra loro nell'altezza del suono. I segnali di avvertenza hanno un suono più acuto (Tono 2, rappresentato in seguito da —) rispetto agli altri segnali acustici (Tono 1, rappresentato in seguito da —). La tabella qui sotto riporta il tono del segnale che accompagna rispettivamente ciascuna situazione.

Tono 1: -

Accensione del misuratore	capitolo 6.1
Richiesta di applicazione del sangue	capitolo 6.2
Inizio del test	capitolo 6.2
Annuncio del risultato	capitolo 6.3

Tono 2: — (Avvertenza)

Annuncio dell'emissione del risultato	capitolo 6.3
Visualizzazione di un messaggio d'errore	capitolo 6.2, 6.4
Avviso che le batterie stanno per esaurirsi	capitolo 6.4
Avviso che la cassetta è vuota	capitolo 6.4

6.1 Segnale al momento dell'accensione

Se la modalità acustica è attivata, quando si accende il misuratore viene emesso un segnale acustico (—).

Non importa in quale modo si accende il misuratore:

- aprendo lo sportello per eseguire un test (vedere capitolo 3.2)
- con il pulsante 0n/0ff (vedere capitolo 2.2)
- con il pulsante ✓ per rivedere i risultati memorizzati (vedere capitolo 5.1)
- con i pulsanti 🗹 e \Lambda per trasferire i dati (vedere capitolo 5.3).

6.2 Segnali acustici durante il test

Dopo il segnale di accensione, il misuratore emetterà nel corso del test:

- un segnale quando si può applicare il sangue o la soluzione di controllo,
- un segnale quando inizia il test,
- una combinazione di diversi segnali che indica il risultato (vedere capitolo 6.3),
- più segnali quando il misuratore visualizza un messaggio d'errore (vedere capitolo 6.4).

6.3 Annuncio del risultato dopo il test

Quando il misuratore visualizza sul display il risultato di un test della glicemia, nella modalità acustica annuncia contemporaneamente il risultato con una serie di segnali acustici. Il risultato non viene trattato come un'unica entità, ma suddiviso nelle sue singole cifre.

Esempi:

- II risultato 138 mg/dl è annunciato come 1 3 8.
- Il risultato 7.6 mmol/l è annunciato come 0 7 virgola decimale - 6.

Ciascuna cifra è rappresentata dal numero corrispondente di segnali; p.es. 4 segnali per il numero 4 (— — —). Lo zero è riprodotto da un segnale lungo I risultati inferiori a 10 mg/dl o a 0.6 mmol/l che sono visualizzati con LO sono riprodotti rispettivamente come 0 - 0 - 0 e 0 - 0 – virgola decimale – 0.

I risultati superiori a 600 mg/dl o a 33,3 mmol/l che sono visualizzati con **HI** sono riprodotti rispettivamente come 9-9-9 e 9-9 – virgola decimale – 9.

Il risultato viene annunciato tre volte consecutivamente. L'annuncio di ciascun risultato è preceduto da due brevi segnali (= =) Complessivamente si udrà guindi: = risultato = = risultato = = risultato .

I simboli visualizzati insieme al risultato, come p.es. o . non vengono comunicati acusticamente.

Se si spegne il misuratore con il pulsante On/Off mentre viene comunicato acusticamente il risultato. l'annuncio viene interrotto e vengono emessi 2 brevi segnali quattro volte consecutivamente (-- -- --).

Misuratori mg/dl

Prima di tutto viene annunciata la cifra delle centinaia, poi quella delle decine e infine quella delle unità. Fra ogni gruppo di segnali c'è una breve pausa. Le centinaia sono sempre annunciate, anche se il risultato è inferiore a 100. In tal caso le centinaia sono rappresentate da 1 lungo segnale che corrisponde a zero.

- 180 mg/dl:
 - 1 segnale pausa 8 segnali pausa 1 segnale lungo
- 72 mg/dl:
 - 1 segnale lungo (per 0 centinaia) pausa 7 segnali – pausa – 2 segnali

Misuratori mmol/l

Prima di tutto viene annunciata la cifra delle decine, poi quella delle unità, la virgola decimale e infine i decimali. Fra ogni gruppo di segnali c'è una breve pausa. Le decine sono sempre annunciate, anche se il risultato è inferiore a 10. In tal caso le decine sono rappresentate da 1 lungo segnale che corrisponde a zero. La virgola decimale è rappresentata da 1 segnale molto breve (-).

- 13,8 mmol/l:
 - 1 segnale pausa 3 segnali pausa 1 segnale molto breve – pausa– 8 segnali
- 4,0 mmol/l:
 - 1 segnale lungo (per 0 decine) pausa 4 segnali – pausa – 1 segnale molto breve –
 - pausa 1 segnale lungo

6.4 Annuncio di avvertenze e messaggi d'errore

Quando le batterie stanno per esaurirsi oppure è stata utilizzata l'ultima zona reattiva della cassetta, il misuratore emette un'avvertenza acustica. Tale avvertenza è formata da due brevi segnali ripetuti tre volte in successione (= = = = =).

L'avvertenza viene emessa in diversi momenti.

- Batterie in esaurimento:
 L'avvertenza acustica viene emessa insieme al messaggio corrispondente sul display quando si accende il misuratore (vedere capitolo 14).
- È stata utilizzata l'ultima zona reattiva della cassetta test:

L'avvertenza acustica viene emessa quando si spegne il misuratore e sul display per i test disponibili appare uno zero. I messaggi d'errore visualizzati dal display (vedere capitolo 16.4) vengono annunciati da due brevi segnali che si ripetono quattro volte consecutivamente (------). Questa sequenza viene emessa una sola volta e non viene ripetuta. Per tutti i messaggi d'errore viene emessa la stessa sequenza di segnali acustici. Ciò significa che i messaggi d'errore non sono differenziati acusticamente.

7 Controllo del misuratore

È possibile controllare che il misuratore fornisca risultati affidabili. Per eseguire il controllo di funzionalità, sulla zona reattiva viene applicata la soluzione di controllo di glucosio al posto del sangue. Il misuratore verifica automaticamente al termine del controllo di funzionalità se il valore ottenuto con la soluzione di controllo di glucosio è corretto e comunica il risultato.

Eseguire sempre il controllo di funzionalità con le soluzioni di controllo Accu-Chek Mobile

- dopo aver inserito una nuova cassetta test,
- dopo aver sostituto le batterie,
- dopo aver pulito internamente il misuratore e la cassetta,
- quando si hanno dubbi sulla plausibilità di un risultato.

Chiedere al Servizio Assistenza dove si possono acquistare le soluzioni di controllo.

Le soluzioni di controllo sono diverse a seconda del Paese. Le etichette delle soluzioni di controllo hanno colori differenti (rosso, blu o bianco). Al termine del controllo di funzionalità è necessario indicare al misuratore il colore dell'etichetta della soluzione di controllo utilizzata (vedere capitolo 7.2). Il misuratore offre la possibilità di selezionare tutti e tre i colori, anche se è possibile che si abbiano a disposizione solo una o due soluzioni di controllo.



Tenere la soluzione di controllo fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento se viene inavvertitamente ingerito il flaconcino o il tappo di chiusura.



Non bere la soluzione di controllo. Contiene sostanze potenzialmente nocive alla salute.



Le persone ipovedenti dovrebbero eseguire sempre il controllo di funzionalità con il supporto di una persona vedente.

7.1 Preparazione del controllo di funzionalità



Per eseguire un controllo di funzionalità è necessario quanto segue:

- il misuratore con la cassetta test inserita.
- un nuovo flaconcino con pennello di soluzione di controllo Accu-Chek Mobile; la soluzione del flaconcino con pennello può essere utilizzata una sola volta.

La procedura per eseguire il controllo di funzionalità è praticamente uguale a quella del test della glicemia, solo che sulla zona reattiva al posto del sangue viene applicata la soluzione di controllo.

Leggere il foglietto illustrativo delle soluzioni di controllo.

7.2 Esecuzione del controllo di funzionalità



Procedere come quando si esegue un test della glicemia: aprire lo sportello oppure selezionare nel *Menu* (principale) la voce *Eseguire il test.*

Qui di seguito è descritta la procedura supponendo che si inizi aprendo lo sportello.


 Aprire lo sportello spingendo fino in fondo la superficie rigata nella direzione della freccia.

Dopo aver superato una leggera resistenza lo sportello scatta in sede.



Fare attenzione a non toccare il nastro, poichè si potrebbe danneggiarlo.

Se il misuratore era spento, ora si accende automaticamente.

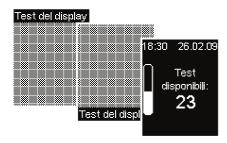




Il misuratore emette un segnale acustico (se *Segnali acus*. è attivato), esegue il test del display e quindi visualizza il numero dei test disponibili.

2 Durante il test del display, controllare che l'immagine a scacchiera non presenti errori.

Il misuratore trasporta quindi una zona reattiva sulla punta anteriore della cassetta test.

Non appena la zona reattiva è posizionata sulla punta della cassetta, sul display appare la richiesta *Applicare il sangue* e il misuratore emette un segnale acustico (se *Segnali acus*. è attivato). La richiesta vale anche per la soluzione di controllo.

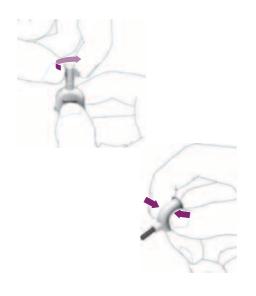

3 Girare e togliere il cappuccio del flaconcino con pennello. Evitare di premere troppo il flaconcino per non far fuoriuscire la soluzione di controllo.

- 4 Tenere il flaconcino leggermente inclinato con il pennello verso il basso.
- 5 Premere leggermente il flaconcino finché si vede una piccola goccia sul pennello.
- 6 Smettere di premere.

La goccia si ritira nuovamente nel pennello. Il pennello è ora pronto per l'uso.

Controllo del misuratore



Tenere il misuratore in mano o metterlo su un piano, mentre si applica la soluzione di controllo sulla zona reattiva.



Non tenere però il misuratore con la zona reattiva rivolta verso l'alto. Se si tiene la zona reattiva verso l'alto, la soluzione di controllo può scorrere e sporcare l'interno del misuratore.

7 Con la punta del pennello stendere la soluzione di controllo al centro della zona reattiva della cassetta test.

La soluzione di controllo viene assorbita non appena tocca la zona reattiva.

8 Allontanare il pennello dalla zona reattiva quando sul display appare il messaggio *Test in corso* con il simbolo della clessidra.



La zona reattiva ha assorbito sufficiente soluzione di controllo e il misuratore emette un segnale acustico (se *Segnali acus*. è attivato) Il simbolo della clessidra indica che è in corso il test.

Il test si conclude dopo circa 5 secondi e sul display appare il risultato.

Il misuratore non è in grado di distinguere il sangue dalla soluzione di controllo. Se è stato impostato un intervallo ideale e il risultato del test con la soluzione di controllo è al di fuori di tale intervallo, sul display apparirà insieme al risultato il simbolo =. Il simbolo viene cancellato automaticamente non appena si evidenzia il risultato come controllo di funzionalità.

Per poter distinguere i risultati del controllo di funzionalità dai risultati della glicemia, è necessario evidenziare i controlli di funzionalità con l'apposito simbolo.

9 Premere (Evidenzia).



- **10** Selezionare con Test controllo.
- 11 Premere (Seleziona).

Il misuratore chiede di indicare il colore dell'etichetta del flaconcino della soluzione di controllo. È importante indicare il colore giusto affinché il misuratore possa giudicare se il risultato è corretto.

- 12 Selezionare il colore con 🔽 🔼.
- **13** Premere (Seleziona).

Il display visualizza nuovamente il risultato, questa volta con il simbolo del *Test controllo* ($\hat{\mathbf{\Delta}}$).

14 Premere (Avanti).



I valori sono solo un esempio

Il misuratore visualizza il valore limite superiore e il valore limite inferiore dell'intervallo di concentrazione. L'intervallo di concentrazione indicato dipende dal colore della soluzione di controllo selezionato.

15 Premere (Avanti).

Il misuratore verifica automaticamente se il risultato rientra nell'intervallo di concentrazione indicato.




Se il risultato rientra nell'intervallo di concentrazione, il display visualizza *Test di controllo valido*.

Se il risultato non rientra nell'intervallo di concentrazione indicato, il display visualizza *Test di controllo non* valido Ripetere il test di controllo (vedere capitolo "Test di controllo non valido – possibili fonti d'errore").

16 Premere (*OK*).

Menu


Eseguire il test Spegnere Memoria Impostazioni Altre funzioni Seleziona

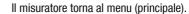

17 Spegnere il misuratore con o tramite *Spegnere.*



- 18 Chiudere lo sportello.
- **19** Eliminare infine il flaconcino con i normali rifiuti domestici.

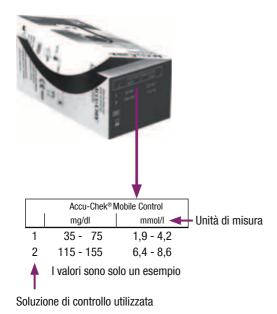

È possibile verificare anche da soli se il risultato rientra nel giusto intervallo di concentrazione.

Confrontare il risultato con la tabella delle concentrazioni riportata sulla confezione della cassetta test.

Il risultato deve rientrare nell'intervallo di concentrazione stampato.

Assicurarsi di confrontare il risultato con i dati della concentrazione previsti per la soluzione di controllo utilizzata (1 o 2) e per l'unità di misura visualizzata dal misuratore (mg/dl o mmol/l).

Test di controllo non valido – possibili fonti d'errore



Se il display visualizza *Test di controllo non valido Ripetere il test di controllo*, il risultato non rientra nell'intervallo di concentrazione indicato. Verificare i punti riportati nella pagina seguente. Se la vostra risposta diverge dalla risposta indicata, correggete il punto in questione e ripetete il test di controllo. Se sono stati osservati tutti i punti indicati e ciò nonostante sul display appare nuovamente *Test di controllo non valido*, contattare il Servizio Assistenza.



Se il display visualizza *Test di controllo non valido Ripetere il test di controllo*, non è garantita la corretta funzionalità del misuratore e della cassetta test. Le misurazioni della glicemia potrebbero produrre falsi risultati. Risultati errati possono influenzare negativamente le decisioni terapeutiche con conseguenti danni alla salute.

Avete eseguito il controllo di funzionalità seguendo correttamente le istruzioni del manuale?	Sì
Avete applicato la soluzione di controllo dopo che il display ha visualizzato la relativa richiesta?	Sì
Avete applicato la soluzione di controllo sulla zona reattiva subito dopo aver aperto il flaconcino?	Sì
Avete indicato il colore giusto?	Sì
Avete eseguito il test nell'intervallo di temperatura consentito (10–40 °C)?	Sì
•	

È stata superata la data di scadenza della soluzione di controllo (vedere etichetta sul fondo del flaconcino accanto al simbolo ??	No
Avete osservato le condizioni di conservazio- ne del misuratore, delle cassette test e delle soluzioni di controllo (vedere capitolo 15 e i foglietti illustrativi delle cassette test e delle soluzioni di controllo)?	Sì
Se il misuratore fosse caduto accidentalmente,	è

Se il misuratore fosse caduto accidentalmente, è possibile che il controllo di funzionalità fornisca risultati che non rientrano nell'intervallo di concentrazione generando il messaggio *Test di controllo non valido*. Rivolgersi in tal caso al Servizio Assistenza.

8 Menu Altre funzioni



Il menu *Altre funzioni* offre ulteriori possibilità di verifica del misuratore. Questo menu consente inoltre di effettuare la pulizia del misuratore e la sostituzione di una cassetta test non utilizzata completamente.

Nel menu *Altre funzioni* sono disponibili le seguenti possibilità di selezione:

- *Menu:* per passare al menu (principale)
- Test del display: per eseguire un test del display extra (vedere capitolo 9)
- Scadenza: per visualizzare la scadenza della cassetta test (vedere capitolo 10)
- Pulizia: per preparare il misuratore alla pulizia (vedere capitolo 11)
- Cambio casset.: per poter estrarre dal misuratore una cassetta test che contiene zone reattive non ancora utilizzate (vedere capitolo 12)

9 Esecuzione del test del display




Se si desidera verificare il corretto funzionamento del display, è possibile farlo oltre a quando si accende il misuratore, anche tramite il menu *Altre funzioni*. In questo caso, il test del display non viene visualizzato solo per circa 2 secondi, ma finché lo si interrompe (al massimo per 1 minuto).






Premere (OK).

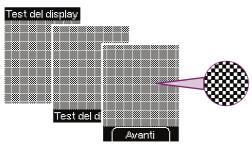

Test del display senza errori

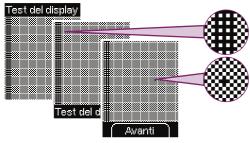

Test del display con errori (esempi)

3 Controllare se l'immagine a scacchiera contiene errori.



Se l'immagine a scacchiera è difettosa, è possibile che i risultati non vengano visualizzati correttamente. In tal caso sostiuire il misuratore presso il rivenditore di fiducia o rivolgersi al Servizio Assistenza.

4 Premere il pulsante (Avanti).

Il misuratore torna al menu Altre funzioni.

Se non si preme il pulsante , il misuratore continua a visualizzare il test del display per circa 1 minuto. Poi il misuratore visualizzerà il numero dei test disponibili e si spegnerà automaticamente.

10 Visualizzazione della scadenza della cassetta test



Per verificare la data di scadenza della cassetta test inserita nel misuratore, procedere come segue:

Accendere il misuratore con → attendere il Menu (principale),

→ selezionare con ✓ Altre funzioni,

→ aprire con ✓ Altre funzioni,

→ selezionare con ✓ Scadenza,

→ aprire con ✓ Scadenza.



Viene visualizzata la data di scadenza.

2 Premere (Avanti).

Il misuratore torna al menu *Altre funzioni*.

11 Pulizia del misuratore e del pungidito

11.1 Pulizia del misuratore

Il funzionamento del misuratore con la cassetta test impedisce normalmente che il misuratore venga a contatto con il sangue o la soluzione di controllo. Non è pertanto necessario un regolare programma di pulizia. Un uso non propriamente corretto del misuratore potrebbe però rendere necessaria la pulizia.



Per la pulizia utilizzare **esclusivamente** acqua fredda o alcol etilico al 70 %. Qualsiasi altro detergente potrebbe danneggiare il misuratore o comprometterne il funzionamento. Utilizzare un panno o un bastoncino di cotone leggermente inumidito. Non spruzzare all'interno del misuratore e non immergerlo in nessun liquido detergente. La funzionalità delle parti interne del misuratore potrebbe risultarne compromessa.

Parti esterne

Se la superficie esterna del misuratore o il display sono sporchi:

Passare un panno leggermente inumidito con acqua fredda o alcol etilico al 70 %.

Parti interne

È necessario pulire le parti interne del misuratore solo se

- l'area attorno alla punta della cassetta test è visibilmente sporca,
- appare il messaggio d'errore E-1 "Cassetta difettosa Inserire cassetta nuova"; l'errore può essere causato da un errato posizionamento dei test,
- appare il messaggio d'errore E-4 "Consultare il manuale per l'uso"; l'errore può essere causato da pelucchi, briciole o simili all'interno della punta della cassetta.

Per poter pulire internamente il misuratore è necessario aprire la voce *Pulizia* nel menu *Altre funzioni* e poi estrarre la cassetta test (vedere pagina seguente).



Se è apparso il messaggio d'errore E-4, la zona reattiva va persa quando in seguito si reinserisce la cassetta test nel misuratore.



Accendere il misuratore con ♣ attendere il Menu (principale),

→ selezionare con ✔ Altre funzioni,

→ aprire con ✔ Altre funzioni,

→ selezionare con ✔ Pulizia,

→ aprire con Pulizia.



Il misuratore richiede ora di aprire lo sportello.

Se si decide di non eseguire la pulizia, annullare la procedura premendo il pulsante (Annulla).




2 Aprire lo sportello spingendo fino in fondo la superficie rigata nella direzione della freccia.

Il misuratore richiederà di estrarre la cassetta test. Dopo circa 2 secondi si spegnerà automaticamente.



Girare il misuratore con il retro rivolto verso l'alto.

Pulizia del misuratore e del pungidito

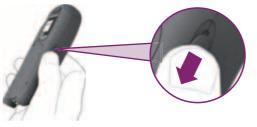

4 Spingere il tasto cursore nella direzione della freccia per aprire il coperchio del vano portacassetta. Il coperchio si apre con uno scatto.



5 Aprire completamente lo sportello del vano portacassetta. Prima che si apra completamente, lo sportello deve superare una leggera resistenza.



Il coperchio del vano portacassetta è completamente aperto quando si trova leggermente inclinato verso l'esterno come illustrato nella figura.



6 Estrarre la cassetta dal vano portacassetta.



- 7 Controllare se all'interno della punta della cassetta si trovano pelucchi, briciole o simili.
- 8 Se sì, toglierli con cautela.

Pulizia del misuratore e del pungidito



Se la finestrella di misurazione ottica fosse visibilmente sporca, pulire l'interno del misuratore come segue:

9 Tamponare con cautela con un panno o un bastoncino di cotone leggermente inumiditi la finestrella di misurazione ottica e l'apertura anteriore del misuratore.



10 Tamponare con cautela con un panno o un bastoncino di cotone leggermente inumiditi i sensori sulla parete laterale.



Non lasciar penetrare alcun liquido all'interno del misuratore. Evitare graffi alla finestrella di misurazione ottica e ai sensori. Eventuali graffi potrebbero compromettere i test o il posizionamento delle zone reattive.



11 Lasciare aperto il coperchio del vano portacassette e chiudere lo sportello.



- 12 Tamponare con cautela con un panno o un bastoncino di cotone leggermente inumiditi la parte interna dello sportello.
- 13 Eliminare i pelucchi eventualmente rimasti.
- **14** Lasciare asciugare completamente il misuratore.

Pulizia del misuratore e del pungidito



15 Riaprire lo sportello.

Il misuratore si accende e visualizza il messaggio d'errore E-2. Il messaggio d'errore non ha in questo caso alcuna importanza, visto che la cassetta test è stata tolta per eseguire la pulizia del misuratore. Ignorare il messaggio d'errore. Il misuratore si spegne di nuovo automaticamente. Continuare con il punto 16.



16 Inserire nuovamente la cassetta nel misuratore con il lato argentato rivolto verso l'alto.



17 Chiudere e premere il coperchio del vano portacassetta. Deve scattare in sede con un CLIC.



18 Chiudere lo sportello.

11.2 Pulizia del pungidito

Per assicurare il perfetto funzionamento del pungidito, pulirlo regolarmente e quando sono presenti tracce di sangue. Staccare il pungidito dal misuratore quando si desidera eseguirne la pulizia (vedere capitolo "Come sganciare e agganciare il pungidito").

Il pungidito può essere pulito solo esternamente. Pulire il pungidito una volta alla settimana con un panno inumidito di alcol etilico al 70 % o isopropanolo al 70 % (reperibili in farmacia).

Pulire inoltre l'interno del cappuccio con un bastoncino di cotone inumidito con una delle soluzioni disinfettanti sopra citate.

Lasciare asciugare il pungidito e il cappuccio completamente.



Non immergere il pungidito nelle soluzioni disinfettanti. La funzionalità delle parti interne potrebbe risultarne compromessa.



Utilizzare solo soluzioni di alcol etilico al 70 % e isopropanolo al 70 %. Altri detergenti e disinfettanti possono rovinare il materiale del pungidito compromettendone il funzionamento.

12 Sostituzione della cassetta test

Se si desidera sostituire una cassetta test vuota o scaduta con una nuova, leggere le istruzioni al capitolo 12.2.

Se si desidera invece togliere una cassetta test già iniziata che contiene ancora zone reattive, è necessario eseguire le operazioni preliminari descritte al capitolo 12.1.

Successivamente è possibile reinserire nel misuratore una cassetta già iniziata. Fino a quel momento, conservare la cassetta in un luogo asciutto al riparo dalla luce.



Quando si inserisce una cassetta già iniziata e prima era inserita un'altra cassetta, la cassetta iniziata perde una zona reattiva. Se si reinserisce subito la cassetta iniziata, non va persa alcuna zona reattiva.

12.1 Preparazione della sostituzione la cassetta





Il misuratore richiede ora di aprire lo sportello.

Se si decide di non sostituire la cassetta, annullare la procedura premendo il pulsante (Annulla).

12.2 Sostituzione della cassetta



1 Aprire lo sportello spingendo fino in fondo la superficie rigata nella direzione della freccia.

Cambio casset.

Sostituire la cassetta poi chiudere lo sportello Se la **sostituzione della cassetta** è stata avviata **tramite** *Cambio casset***.**, il misuratore richiederà di sostituire la cassetta test. Poco dopo il misuratore si spegnerà automaticamente.

18:30 26.02.09 Cassetta vuota Inserire cassetta nuova

oppure 18:30 26.02.09 E-1 Cassetta difettosa Inserire cassetta nuova

18:30 26.02.09 Scadenza superata Inserire cassetta nuova


oppure

Se la cassetta nel misuratore è vuota, difettosa oppure scaduta, il misuratore visualizza dopo il test del display e il numero dei test disponibili un'avvertenza o il messaggio d'errore E-1 (vedere anche capitoli 16.2 e 16.4). Poco dopo il misuratore si spegnerà automaticamente

Sostituzione della cassetta test



2 Girare il misuratore con il retro rivolto verso l'alto.

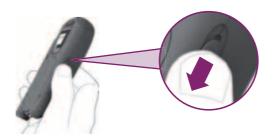

3 Spingere il tasto cursore nella direzione della freccia per aprire il coperchio del vano portacassetta. Il coperchio si apre con uno scatto.



4 Aprire completamente il coperchio del vano portacassetta. Prima che si apra completamente, lo sportello deve superare una leggera resistenza.

Il coperchio del vano portacassetta è completamente aperto quando si trova leggermente inclinato verso l'esterno come illustrato nella figura.



5 Estrarre la cassetta dal vano portacassetta.

Le cassette test usate possono essere eliminate insieme ai normali rifiuti domestici.


Sostituzione della cassetta test




6 Togliere una cassetta nuova dalla confezione.



7 Inserire la cassetta nel misuratore con il lato argentato rivolto verso l'alto.

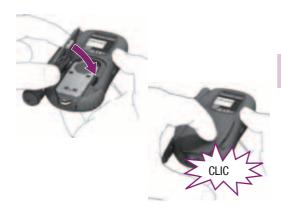

Chiudere e premere il coperchio del vano portacassetta. Deve scattare in sede con un CLIC.

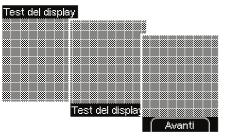

Dopo aver chiuso il coperchio del vano portacassetta, il misuratore si accende ed esegue il test del display.

Premere il pulsante (Avanti).





Il display visualizza la data di scadenza della cassetta.

10 Premere il pulsante (Avanti).

Il misuratore visualizza il numero dei test disponibili e passa al menu (principale).



11 Chiudere lo sportello.

Se la cassetta test che è stata tolta contiene ancora dei test e non ha superato la scadenza, può essere reinserita successivamente nel misuratore. Il misuratore riconoscerà la cassetta, il numero dei test disponibili e la data di scadenza.

13 Informazioni sul numero di test disponibili





Premendo un pulsante è possibile vedere quanti test restano a disposizione nella cassetta inserita nel misuratore.

Se il misuratore è spento:

Premere il pulsante finché il misuratore si accende (più di 2 secondi).

Il display visualizza il numero dei test disponibili nella cassetta. Poco dopo il misuratore si spegne di nuovo automaticamente.

14 Sostituzione delle batterie



Questo messaggio appare quando le batterie stanno per esaurirsi. Finché non si sostituiscono le batterie, il messaggio riapparirà ogni volta che si spegne il misuratore. Quando il messaggio appare per la prima volta, si possono eseguire ancora circa 50 test.

Si consiglia di sostituire le batterie al più presto possibile. Le batterie hanno già consumato gran parte della propria capacità ed un eventuale cambiamento delle condizioni ambientali (p.es. freddo) può comprometterne ulteriormente le prestazioni.

Sono necessarie 2 batterie alcalino-manganese ad alta energia, tipo AAA, LR 03, AM 4 o Micro (1,5 V). Sostituire semore insieme entrambe le batterie.

Non utilizzare batterie ricaricabili poichè hanno una durata sensibilmente inferiore alle normali batterie.

Con una nuova coppia di batterie è possibile eseguire almeno 500 test o misurare per circa 1 anno.

Quando si sostituiscono le batterie o si ripone il misuratore senza batterie, le impostazioni e i risultati restano conservati nella memoria.

Il misuratore dispone di una batteria tampone integrata. La batteria tampone provvede all'alimentazione del misuratore quando non sono inserite le batterie. La batteria tampone dura circa 5 anni. Se si dovesse esaurire, la batteria tampone non può essere sostituita. Una batteria tampone scarica non ha alcuna influenza sul funzionamento del misuratore.

Se la batteria tampone dovesse esaurirsi, si hanno a disposizione ancora 10 minuti per sostituire le batterie. Superato quest'arco di tempo, il misuratore cancella ora e data e sul display appaiono solo delle lineette. In tal caso impostare nuovamente ora e data.



Non gettare le batterie nel fuoco. Pericolo di esplosione.



Eliminare le batterie usate negli appositi contenitori per la raccolta differenziata o riconsegnarle al rivenditore.



Togliere le batterie dal misuratore, se non lo si usa per un periodo di tempo prolungato. Ora e data restano comunque memorizzate nel misuratore.

Sostituzione delle batterie




 Sbloccare il coperchio del vano batterie spingendolo fino in fondo nella direzione della freccia.
 Il coperchio deve superare un punto di leggera resistenza. Il coperchio è sbloccato correttamente quando supera questo punto di resistenza con un CLIC.

2 Aprire il coperchio del vano batterie verso l'alto.




3 Girare il misuratore con il vano batterie rivolto verso il basso. Le batterie scivolano fuori dal vano.

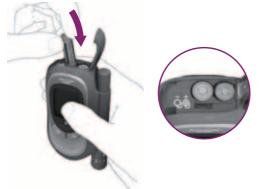

Inserire nel vano due nuove batterie. Prestare attenzione ai simboli + e - nel vano batterie. Il lato corrispondente della batteria deve essere rivolto verso l'alto.

Sostituzione delle batterie

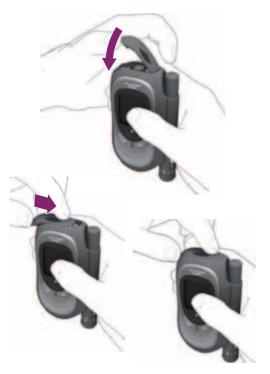

5 Chiudere nuovamente il coperchio del vano batterie.

6 Spingere il coperchio del vano batterie fino in fondo nella direzione della freccia per bloccarlo. Il coperchio scatta in sede con un CLIC.

15 Condizioni di misurazione e conservazione

Per garantire l'affidabilità del misuratore e del pungidito, nonché la precisione dei risultati, è necessario osservare le condizioni elencate nelle pagine seguenti.

15.1 Temperatura

- Conservare il misuratore senza batterie e senza cassetta test ad una temperatura compresa fra -25 e +70 °C.
- Conservare il misuratore con le batterie e senza la cassetta test ad una temperatura compresa fra -10 e +50 °C.



Ad una temperatura superiore a +50 °C le batterie possono deteriorarsi e danneggiare il misuratore.



Ad una temperatura inferiore a -10 °C le batterie non hanno sufficiente tensione per far funzionare l'orologio del misuratore.

 Conservare il misuratore con le batterie e con la cassetta test ad una temperatura compresa fra +2 e +30 °C.

- La temperatura durante il test della glicemia ed il controllo di funzionalità deve essere compresa fra +10 e +40 °C.
- Il misuratore consente ancora di eseguire un test ad una temperatura fra +8 e +10 °C o fra +40 e +42 °C. In tal caso apparirà tuttavia la seguente avvertenza (vedere anche capitolo 16.2).







I valori glicemici misurati in presenza di questa avvertenza non possono essere utilizzati come riferimento per prendere decisioni terapeutiche. I risultati potrebbero essere errati. Risultati errati possono influenzare negativamente le decisioni terapeutiche con conseguenti danni alla salute. Non è possibile eseguire alcun test a temperature inferiori a +8°C e superiori a +42°C. In tal caso sul display appare il seguente messaggio d'errore:

> 18:30 26.02.09 E-8 Temperatura troppo bassa Impossibile eseguire il test

18:30 26.02.09 E-8 Temperatura troppo alta Impossibile eseguire il test



Non portare mai forzatamente il misuratore ad una determinata temperatura, collocandolo p.es. sul calorifero o in frigorifero. Il misuratore potrebbe risultare danneggiato e fornire falsi risultati. Risultati errati possono influenzare negativamente le decisioni terapeutiche con conseguenti danni alla salute.

 Non lasciare il pungidito in posizione caricata o esposto a lungo a temperature molto basse o alte (p. es. in un'auto surriscaldata). Tali condizioni possono danneggiare parti del pungidito compromettendone il funzionamento.

15.2 Umidità atmosferica

Eseguire i test della glicemia ad una umidità atmosferica relativa compresa fra il 15 % e l'85 %.

Conservare il misuratore ad una umidità atmosferica relativa compresa fra il 15 % e il 93 %.



Variazioni improvvise di temperatura possono provocare la formazione di condensa all'interno o all'esterno del misuratore. In questo caso non accendere il misuratore. Attendere il tempo necessario perché il misuratore ritorni lentamente a temperatura ambiente. Non lasciare il misuratore in ambienti umidi (p.es. in bagno).

15.3 Condizioni di luce

Il display visualizza messaggi, numeri e simboli in giallo. La luce diretta sul display potrebbe rendere difficile la lettura. Se necessario, schermare il misuratore, ad esempio con il proprio corpo.



Proteggere il misuratore da forti fonti luminose (p.es. luce solare diretta, riflettori). Queste possono compromettere il corretto funzionamento del misuratore e causare messaggi d'errore.

15.4 Fonti di disturbo



Forti campi magnetici possono influenzare la funzionalità del misuratore. Non usare il misuratore vicino a fonti di forte radiazione elettromagnetica.



Per evitare scariche elettrostatiche, non usare il misuratore in ambienti molto secchi, soprattutto in concomitante presenza di materiali sintetici.

16 Simboli, avvisi, problemi e messaggi d'errore

16.1 Simboli

Il misuratore fornisce la maggior parte delle informazioni in forma di testo. Il risultato viene inoltre corredato da informazioni in forma di simboli – sia dopo un test che nella memoria dei risultati.



Le batterie si stanno esaurendo.



Risultato di un controllo di funzionalità.



La temperatura durante il test era al di fuori dell'intervallo consentito fra +10 e +40 °C. Nonostante l'avvertenza, si è deciso di procedere con il test.



È stato attivato un intervallo ideale dei valori glicemici. Il risultato è al di sotto del limite inferiore o al di sopra del limite superiore dell'intervallo ideale impostato.



(low=basso) al posto di un risultato: il risultato è inferiore a 10 mg/dl (0,6 mmol/l).



Il simbolo LO può significare che il valore glicemico è troppo basso (eventuale ipoglicemia grave). In tal caso seguire subito le indicazioni raccomandate dal medico curante e ripetere il test.



(high=alto) al posto di un risultato: il risultato è superiore a 600 mg/dl (33,3 mmol/l). Ripetere il test.



Il risultato è stato evidenziato con il simbolo Fvento.



Il risultato è stato evidenziato con il simbolo *Prima pasto.*



Il risultato è stato evidenziato con il simbolo *Dopo pasto*.

16.2 Avvisi

18:30 26.02.09 Cassetta vuota Inserire cassetta nuova

Cassetta vuota: questo avviso appare quando è stato avviato un test e sono già state utilizzate tutte le zone reattive della cassetta.

Inserire una nuova cassetta test nel misuratore.



Scadenza della cassetta: questo avviso appare quando si inizia un test e la cassetta test scade dopo 10 giorni. L'avviso viene ripetuto quando mancano rispettivamente 5. 2 e 1 giorno alla scadenza.

Premere il pulsante (Avanti) per iniziare il test.

18:30 26.02.09

Scadenza superata Inserire cassetta nuova Scadenza superata: questo avviso appare quando la cassetta è inserita da più di 3 mesi nel misuratore oppure ha superato la data di scadenza.

Inserire una nuova cassetta test nel misuratore.

Batterie in esaurimento (=++) Inserire batterie nuove



Batterie in esaurimento: questo messaggio appare quando le batterie stanno per esaurirsi. Finché non si sostituiscono le batterie, il messaggio riapparirà ogni volta che si spegne il misuratore. Quando il messaggio appare per la prima volta, si possono eseguire ancora circa 50 test.

Sostituire le batterie al più presto possibile.

Chiudere sportello: questa richiesta appare quando lo sportello è aperto e deve essere chiuso:

- dopo un test, quando si spegne il misuratore;
- quando si chiude il coperchio del vano portacassetta (dopo aver sostituito la cassetta o aver eseguito la pulizia);
- quando si inizia un test tramite il menu Eseguire il test e lo sportello è già aperto.

Chiudere lo sportello.


Aprire sportello Continuare con le impostazioni Eseguire il test Seleziona **Sportello aperto:** questo avviso appare quando si modifica un'impostazione (p.es. la data) o se ne immette una nuova (p.es. un promemoria) e lo sportello è aperto.

Chiudere lo sportello se si desidera procedere con le impostazioni.

oppure

Selezionare con se si desidera *Continuare con le impostazioni* oppure *Eseguire il test*.

- Continuare con le impostazioni: il misuratore richiede quindi di chiudere lo sportello.
- Eseguire il test: le impostazioni vengono interrotte (eventuali modifiche vanno perse) e una zona reattiva si posiziona per il test.

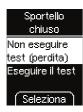

Sportello chiuso: questo avviso appare quando si chiude lo sportello dopo che il misuratore ha posizionato una zona reattiva per il test.

Aprire nuovamente lo sportello se si desidera procedere con il test.

oppure

Selezionare con se si desidera *Non eseguire* test oppure *Eseguire il test*.

- Non eseguire test: il misuratore entra nel menu (principale). La zona reattiva posizionata non può più essere utilizzata perché il misuratore fa scorrere in avanti il nastro. Il numero dei test disponibili diminuisce.
- Eseguire il test: il misuratore richiede di aprire lo sportello.





Temperatura troppo bassa / troppo alta: questo avviso appare all'inizio di un test quando la temperatura ambiente o del misuratore è compresa fra +8 e +10 °C o fra +40 e +42 °C.

Selezionare con **\(\)** se si desidera *continuare* oppure *interrompere* il test.

- Continuare: il misuratore posiziona una zona reattiva.
- Interrompere: il misuratore entra nel menu (principale). Chiudere lo sportello.

Se nonostante l'avviso si esegue il test, il risultato sarà evidenziato e memorizzato con il simbolo ...



I valori glicemici misurati in presenza di questa avvertenza non possono essere utilizzati come riferimento per prendere decisioni terapeutiche. I risultati potrebbero essere errati. Risultati errati possono influenzare negativamente le decisioni

terapeutiche con conseguenti danni alla salute. Spostare il misuratore dove la temperatura ambiente è compresa fra +10 e +40 °C e attendere finché la temperatura del misuratore ha raggiunto la temperatura ambiente.



Promemoria: se sono stati impostati dei promemoria, all'ora prefissata apparirà questo avviso. Contemporaneamente il misuratore emetterà dei segnali acustici, se nel menu *Impostazioni / Suoni/Avvisi* è stato attivato *Promemoria.*

Per spegnere il promemoria:

Premere un pulsante qualsiasi.

16.3 Problemi

Il misuratore non si accende.

■ Le batterie sono scariche o non sono inserite.

Inserire nuove batterie.

■ Le batterie sono state inserite in modo errato.

Toglierle e inserirle come indicato nel vano batterie.

 La temperatura ambiente è bassa e le batterie sono quasi esaurite.

Fare in modo che la temperature ambiente sia compresa fra +10 e +40 °C e attendere finché la temperatura del misuratore abbia raggiunto la temperatura ambiente. Inserire nuove batterie.

 Le parti elettroniche sono umide a causa della condensa.

Lasciare asciugare lentamente il misuratore.

■ Il misuratore è difettoso.

Al posto di ora e data appaiono solo lineette.

Ora e data non sono più memorizzate nel misuratore.

Sono state sostituite le batterie, oppure il misuratore è stato conservato senza batterie e la batteria tampone integrata è esaurita. La batteria tampone garantisce normalmente che ora e data rimangano nella memoria del misuratore quando non sono inserite le batterie.

Impostare nuovamente ora e data.

I risultati memorizzati senza ora e data non possono essere analizzati o possono essere solo parzialmente analizzati quando vengono trasferiti ad un computer.

Quando si esaurisce la batteria tampone si hanno a disposizione ancora 10 minuti di tempo prima che ora e data scompaiano dalla memoria del misuratore. Una volta trascorsi i 10 minuti, al posto dell'ora e della data appaiono solo delle lineette.

Il misuratore è acceso, ma il display resta vuoto.

Il display è difettoso.

16.4 Messaggi d'errore

Nelle pagine seguenti sono descritti tutti i messaggi d'errore, incluse le cause e le operazioni per eliminarli.

Quando appare un messaggio d'errore, spegnere il misuratore:

Premere il pulsante On/Off pinché la barra a segmenti luminosi sul display è completa (almeno 2 secondi).

Se i messaggi d'errore si verificano con frequenza, rivolgersi al Servizio Assistenza.

Se il misuratore fosse caduto accidentalmente, è possibile che appaiono messaggi d'errore. Rivolgersi anche in questo caso al Servizio Assistenza.

E-1



 La cassetta test o il misuratore sono probabilmente difettosi.

Togliere la cassetta dal misuratore e inserirla nuovamente.

■ Se riappare il messaggio d'errore:

Pulire il misuratore e la cassetta test.

- Se riappare il messaggio d'errore:
 Inserire una nuova cassetta test nel misuratore.
- Se continua ad apparire il messaggio d'errore, il misuratore è difettoso.

18:30 26.02.09 E-2 Consultare il manuale per l'uso

■ Non c'è nessuna cassetta test nel misuratore.

Inserire una nuova cassetta test.

■ Il lettore RFID del misuratore è difettoso.

Rivolgersi al Servizio Assistenza.

 Il chip RFID sulla cassetta manca o è difettoso. La cassetta è inutilizzabile.

Inserire una nuova cassetta test.

E-3



Si è verificato un errore del misuratore. Se dopo aver acceso il misuratore, riappare il messagqio d'errore:



 All'interno della punta della cassetta si trovano pelucchi, briciole o simili.

Eliminarli. Seguire a questo scopo le istruzioni al capitolo 11.1.

- Da questo punto è possibile passare direttamente al menu *Pulizia* senza dover prima spegnere il misuratore. Premere il pulsante (*Avanti*).
- La cassetta non è inserita correttamente nel misuratore.

Togliere la cassetta e inserirla nuovamente.



 La zona reattiva ha assorbito una quantità insufficiente di sangue o di soluzione di controllo.

Ripetere il test con una quantità maggiore di sangue o di soluzione di controllo.

 La goccia di sangue o la soluzione di controllo non è stata applicata al centro della zona reattiva.

Ripetere il test. Applicare la goccia di sangue o la soluzione di controllo esattamente al centro della zona reattiva sulla punta della cassetta.



Durante il test una fonte luminosa, p.es. luce solare diretta sul misuratore, ha disturbato il test.

Spostarsi all'ombra o schermare il misuratore, ad esempio con il proprio corpo. Ripetere il test.



La goccia di sangue o la soluzione di controllo è stata applicata troppo presto sulla zona reattiva, ovvero prima che il display visualizzasse la richiesta *Applicare il sangue*.

Ripetere il test. Applicare il sangue o la soluzione di controllo sulla zona reattiva quando sul display appare *Applicare il sangue*.

18:30 26.02.09 E-7 Consultare il manuale per l'uso 18:30 26.02.09 E-8 Temperatura troppo bassa Impossibile eseguire il test

E-8

18:30 26.02.09 E-8 Temperatura troppo alta Impossibile eseguire il test

Si è verificato un errore del misuratore. Se dopo aver acceso il misuratore, riappare il messagqio d'errore:

Rivolgersi al Servizio Assistenza.

La temperatura ambiente o la temperatura del misuratore è troppo bassa (inferiore a $+8\,^{\circ}$ C) o troppo alta (superiore a $+42\,^{\circ}$ C) per eseguire il test.

Fare in modo che la temperatura ambiente sia compresa fra ± 10 e ± 40 °C e attendere finché la temperatura del misuratore abbia raggiunto la temperatura ambiente.



Quando le batterie sono praticamente esaurite e non è più possibile eseguire alcun test, sul display appare per 3 secondi questo avviso. Dopodiché il misuratore si spegne.

Inserire nuove batterie.

17 Smaltimento del misuratore


Durante i test della glicemia il misuratore può venire a contatto con sangue. I misuratori usati possono essere quindi una potenziale fonte d'infezione. Dopo aver tolto le batterie, eliminare il misuratore usato in conformità alle norme locali vigenti. Togliere anche la batteria tampone (vedere pagina seguente).

Per informazioni sul corretto smaltimento rivolgersi alle autorità comunali competenti.

Il misuratore non rientra nel campo d'applicazione della Direttiva 2002/96/CE (direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).



Eliminare le batterie negli appositi contenitori per la raccolta differenziata o riconsegnarle al rivenditore.

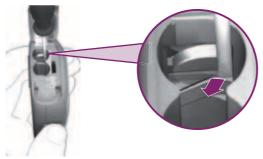



Come togliere la batteria tampone

Oltre alle due batterie, sulla parete laterale del vano batterie vi è una terza batteria, la cosiddetta batteria tampone.

Prima di smaltire il misuratore, è necessario togliere anche questa batteria.

Togliere la batteria tampone come segue:

 Staccare con un piccolo cacciavite o un utensile simile la barretta che si troya davanti alla batteria.

La batteria ricade nel vano batterie.

2 Capovolgere il misuratore e far cadere fuori la batteria tampone.

18 Dati tecnici

Tipo di strumento	Accu-Chek Mobile
N. art./ N. serie	vedere l'etichetta posta sul retro del misuratore
Principio del test	Fotometria a riflessione per la determinazione del glucosio in sangue capillare fresco. Per l'impiego di altri tipi di campioni fare riferimento al foglietto illustrativo delle cassette test Accu-Chek Mobile. Anche se sulla zona reattiva viene sempre applicato sangue intero per eseguire il test, il misuratore visualizzerà risultati che corrispondono a quelli nel plasma. Le informazioni relative alla procedura di funzionamento, al principio del test e ai metodi di riferimento sono riportate nel foglietto illustrativo delle cassette test Accu-Chek Mobile.
Intervallo di misura	10–600 mg/dl (0,6–33,3 mmol/l)
Volume di sangue	circa 0,3 µl (1 µl (microlitro) = 1 millesimo di millilitro)
Tempo di misurazione	circa 5 secondi (secondo la concentrazione)
Alimentazione	2 batterie alcalino-manganese ad alta energia (1,5 V, tipo AAA, LR 03, AM 4 o Micro), batteria tampone: batteria bottone al litio, 3V, tipo CR1025.
Durata delle batterie	almeno 500 test o circa 1 anno (meno se s'imposta la luminosità del display sul livello 3 o il volume sul livello 4 o 5 oppure si utilizza la modalità acustica, dato il maggior consumo di energia)
Autospegnimento	dopo 1 o 2 minuti, secondo lo stato operativo

Temperatura

durante il test fra +10 e +40 °C

durante la conservazione

misuratore senza batterie e senza cassetta test: -25 bis +70 °C con batterie e senza cassetta test: -10 bis +50 °C -10 bis +50 °C

" con batterie e con cassetta test: +2 bis +30 °C

Umidità atmosferica

durante il test fra il 15 e l'85 % di umidità atmosferica relativa surante la conser-

vazione

Altitudine livello del mare sino a 4000 m Memoria dei risultati 500 risultati con ora e data, media dei valori per 7, 14 e 30 giorni. Dimensioni $123 \times 66 \times 28$ mm con pungidito Peso circa 150 g con pungidito, batterie, cassetta test e caricatore delle lancette Display display OLED (Organic Light Emitting Diode, diodo organico ad emissione di luce) Interfaccia interfaccia a infrarossi Classe di protezione Ш classe 1 LED/IRED

Compatibilità elettromagnetica

Questo strumento risponde ai requisiti di immunità elettromagnetica secondo EN ISO 15197, A. Base di controllo per i test di immunità (alla scarica elettrostatica) è stato lo standard IEC 61000-4-2.

Lo strumento risponde inoltre ai requisiti per le emissioni elettromagnetiche secondo EN 61326. L'emissione elettromagnetica è quindi minima. Non si prevedono disturbi da altri apparecchi elettrici in attività.

Valutazione delle prestazioni

Le caratteristiche di prestazione del sistema Accu-Chek Mobile (misuratore Accu-Chek Mobile con cassetta test Accu-Chek Mobile) sono state determinate con sangue capillare di persone con diabete (confronto dei metodi, accuratezza), sangue venoso (ripetibilità) e soluzioni di controllo (riproducibilità). Il sistema è stato calibrato con sangue venoso contenente diverse concentrazioni di glucosio. I valori di riferimento sono ottenuti con il metodo di esochinasi. Per la comparazione dei metodi, i risultati sono stati confrontati con i risultati ottenuti tramite il metodo di esochinasi con deproteinizzazione (analizzatore automatico). Il metodo di esochinasi è riconducibile ad uno standard NIST (riconducibilità).

Il sistema di determinazione della glicemia Accu-Chek Mobile risponde ai requisiti della norma EN ISO 15197.

Roche Diagnostics dichiara che misuratore di glicemia Accu-Chek Mobile è conforme ai requisiti basilari e alle altre disposizioni in materia previste dalla Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è riportata al seguente indirizzo Internet: http://mobile.accu-chek.com.

19 Componenti del sistema

Componenti appartenenti al misuratore Accu-Chek Mobile:

- Cassette test Accu-Chek Mobile
 Usare solo queste cassette test per eseguire le misurazioni con il misuratore Accu-Chek Mobile.

Componenti appartenenti al pungidito Accu-Chek FastClix Mobile:

- Caricatori di lancette Accu-Chek FastClix Mobile Usare solo questi caricatori di lancette per eseguire i prelievi di sangue con il pungidito Accu-Chek FastClix Mobile.
- Cappuccio AST Accu-Chek FastClix Mobile Se per il test si desidera impiegare sangue prelevato da un sito alternativo (tenar e ipotenar del palmo della mano, braccio, avambraccio, polpaccio o coscia), è necessario usare per il prelievo con il pungidito Accu-Chek FastClix Mobile lo speciale cappuccio AST (cappuccio grigio con fondo trasparente).

20 Brevetti

Misuratore di glicemia Accu-Chek Mobile

US 5,889,585; US 6,055,060; US 6,379,317

Pungidito Accu-Chek FastClix Mobile

EP 1 263 320; US 6,379,317; US 6,419,661; US 7,077,828; US 7,223,276; US 7,273,484; US 7,322,998; US Re. 35,803

21 Servizio Assistenza

21.1 Consulenza e soluzione problemi

Per tutte le questioni riguardanti l'uso del misuratore Accu-Chek Mobile e del pungidito Accu-Chek FastClix Mobile, la plausibilità dei risultati ed eventuali difetti del misuratore, delle cassette test, del pungidito o del caricatore delle lancette, rivolgersi al Servizio Assistenza di Roche Diagnostics. Non tentare di effettuare riparazioni o apportare modifiche al misuratore o al pungidito. I nostri collaboratori vi aiuteranno a risolvere eventuali problemi relativi al misuratore, alle cassette test, al pungidito o al caricatore delle lancette di Roche Diagnostics. Gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati al paragrafo successivo.

21.2 Indirizzi

Roche Diagnostics S.p.A. Viale G.B. Stucchi 110 20052 Monza (MI), Italia Numero Verde: 800-822189 www.accu-chek.it

Roche Diagnostics (Svizzera) AG Industriestrasse 7 6343 Rotkreuz, **Svizzera** Hotline Servizio Diabete 0800 803 303 24 ore/gratuito www.accu-chek.ch

22 Indice analitico

A	Cassetta test 16
Accendere il misuratore 30	data di scadenza 46
eseguire il test 65, 68	inserire prima volta 41
richiamare la memoria dei risultati 134	scadenza 46, 181, 211
trasferire i risultati 144	smaltire 197
Altre funzioni, menu 178	sostituire 193
Asterisco (simbolo) 78, 210	termine di scadenza per l'uso 46
	Clessidra (simbolo) 74
В	Compatibilità elettromagnetica 229
Batterie	Componenti del sistema 230
durata 202, 227	Condizioni di conservazione 207
estrarre la pellicola di protezione 48	Condizioni di luce 209
simbolo 77, 210	Condizioni di misurazione 207
smaltimento 203, 225	Controllare il misuratore 165
sostituzione 202	Controllo di funzionalità 165
tipo 202, 227	eseguire 167
Brevetti 231	evidenziare 83, 171
	fonti d'errore 176
C	
Cappuccio AST 55	D
Caricatore di lancette 17, 57	Data di scadenza
inserire 57	cassetta test 46
smaltire 61	soluzione di controllo 177
sostituire 61	Data, impostare 95

Dati tecnici 227 Dati, trasferimento 144 Display 15, 228 impostazione luminosità 128 simboli visualizzati nel ~ 210 Dopo pasto (simbolo) 78, 80	Formato di visualizzazione dei risultati memorizzati 134 impostare 156 Funzionalità, controllo di ~ eseguire 167 evidenziare 83, 171 fonti d'errore 176
E	
Etichetta del misuratore 16, 40	H (dioplay) 77 94 210
Evento (simbolo) 78, 80 Evidenziare un risultato 78	HI (display) 77, 84, 210
Evidenziale dil fisultato 10	T. Control of the Con
F	Impostazioni
File CSV 151	data 95
Flaconcino (simbolo) 78, 172, 210	formato di ora/data 98
Fonti di disturbo	impostazioni predefinite in fabbrica 87
elettromagnetiche 209	intervallo ideale 119
luce 209	lingua 130
Fonti d'errore	luminosità 128
controllo di funzionalità 176	menu 90
test 85	modalità acustica 100
trasferimento risultati 155	ora 92
Formato di ora/data, impostare 98	promemoria 104 segnali acustici per i ~ 100 schema 87


segnali acustici 100 suoni/avvisi 100 volume 126 nterfaccia a infrarossi 15, 144 ntervallo di misura 84, 227 ntervallo ideale 119	Mela morsicata (simbolo) 78, 142, 210 Memoria, risultati 133 Menu aprire 34 descrizione 23 schema 240
attivare 122, 123	Messaggi d'errore 219
cambiare 122, 124	nella modalità acustica 164
disattivare 122, 123	Misuratore
impostare 120	accendere 30
modificare 122	eseguire il test 65, 68
simbolo 77, 119, 210	richiamare la memoria dei risultati 134
nvio, pulsante 15, 26	trasferire i risultati 144
	conservare 207
-	controllare 165
ancetta, posizionare una nuova 60	pulire 182
_0 (display) 77, 84, 210	schema 14
uminosità del display 128	smaltire 225
	spegnere 32
VI	dopo il test 75, 76
Media dei valori 139	Modalità acustica 100, 101, 159
Mela (simbolo) 78, 142, 210	attivare/disattivare 102


N	Pulizia
Numero dei test disponibili 31, 201	misuratore 182
Numero delle lancette disponibili 17, 60	pungidito 192
,	Pulsante
0	Giù 15, 28, 137
On/Off, pulsante 15, 26	Invio 15, 26
Ora, impostare 92	On/Off 15, 26
•	Su 15, 29, 201
P	Pulsante multifunzionale, pungidito 17, 71, 72
Prima pasto (simbolo) 78, 80	Pungidito
Principio del test 227	agganciare 63
Problemi 217	caricare 71
Profondità di puntura	prelevare il sangue e con il ~ 70
impostare 59	pulire 192
indicazione 17, 59	schema 17
Promemoria 104	sganciare 62
attivare 109, 111	
cambiare 109, 112	R
cancellare 109, 113	Risultati memorizzati 133
disattivare 109, 111	formato di visualizzazione 134, 156
impostare dopo un test 83	Risultato
impostare nuovi ~ 106	evidenziare 78
modificare 109	media dei valori 139
segnali acustici per i ~ 100	richiamare dalla memoria 134
Promemoria singolo 115	trasferire 144


S	Simboli 210
Sangue	durante il test 77
applicare sulla zona reattiva 73	Simbolo per evidenziare
quantità applicata insufficiente 221	dopo pasto 78, 80
volume 21, 227	evento 78, 80
Scadenza, cassetta test 46, 211	prima pasto 78, 80
visualizzare scadenza 181	test controllo 78, 83, 171
Schema	Siti di prelievo alternativi 55
menu 240	Smaltimento
misuratore 14	batterie 203, 225
pungidito 17	cassetta test 197
simboli 210	misuratore 225
Segnali acustici 100	Soluzione di controllo 165
annuncio risultati tramite ~ 162	smaltire 174
attivare 102	scadenza 177
disattivare 102	Spegnere il misuratore 32
durante il test 100	dopo il test 75, 76
per i promemoria 100	Sportello 15, 65, 69
Servizio Assistenza 232	Suoni e avvisi, impostare 100

T	Test disponibili 31, 32
Tabella delle concentrazioni 41, 175	visualizzazione 201
Tasto cursore	Trasferimento risultati 144
per aprire il coperchio del vano	come tabella (file CSV) 151
portacassetta 16, 43, 196	fonti d'errore 155
per sganciare il pungidito 16, 62	per analisi 149
Temperatura 207, 228	·
Tempo di misurazione 74, 227	U
Termine di scadenza per l'uso della cassetta test 46	Umidità atmosferica 208, 228
Termometro (simbolo) 77, 210, 215	Unità di misura del risultato (mg/dl, mmol/l) 5, 40
Test	Uso previsto
eseguire 64	misuratore 3
fonti d'errore 85	pungidito 3
Test (zone reattive) 20	
visualizzazione del numero di ~ disponibili 31,	V
32, 201	Valutazione delle prestazioni 229
Test controllo 83	Vano batterie 14, 205
simbolo 78	
Test del display 30	Z
eseguire 179	Zona reattiva 15
Test della glicemia 54	

23 Schema generale del menu

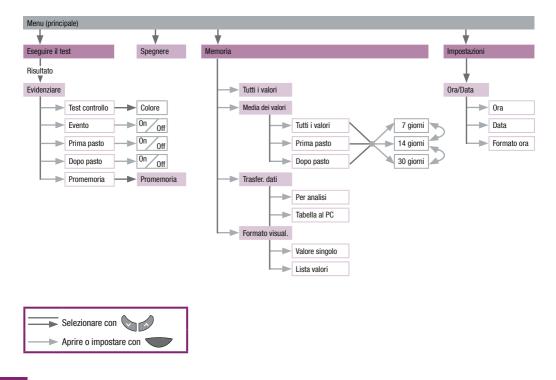

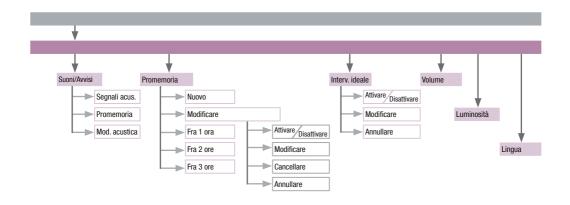

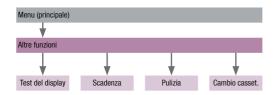



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE e FASTCLIX sono marchi di Roche.

Roche Diagnostics GmbH 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com